

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.




 +7 908 736 60 73

---



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

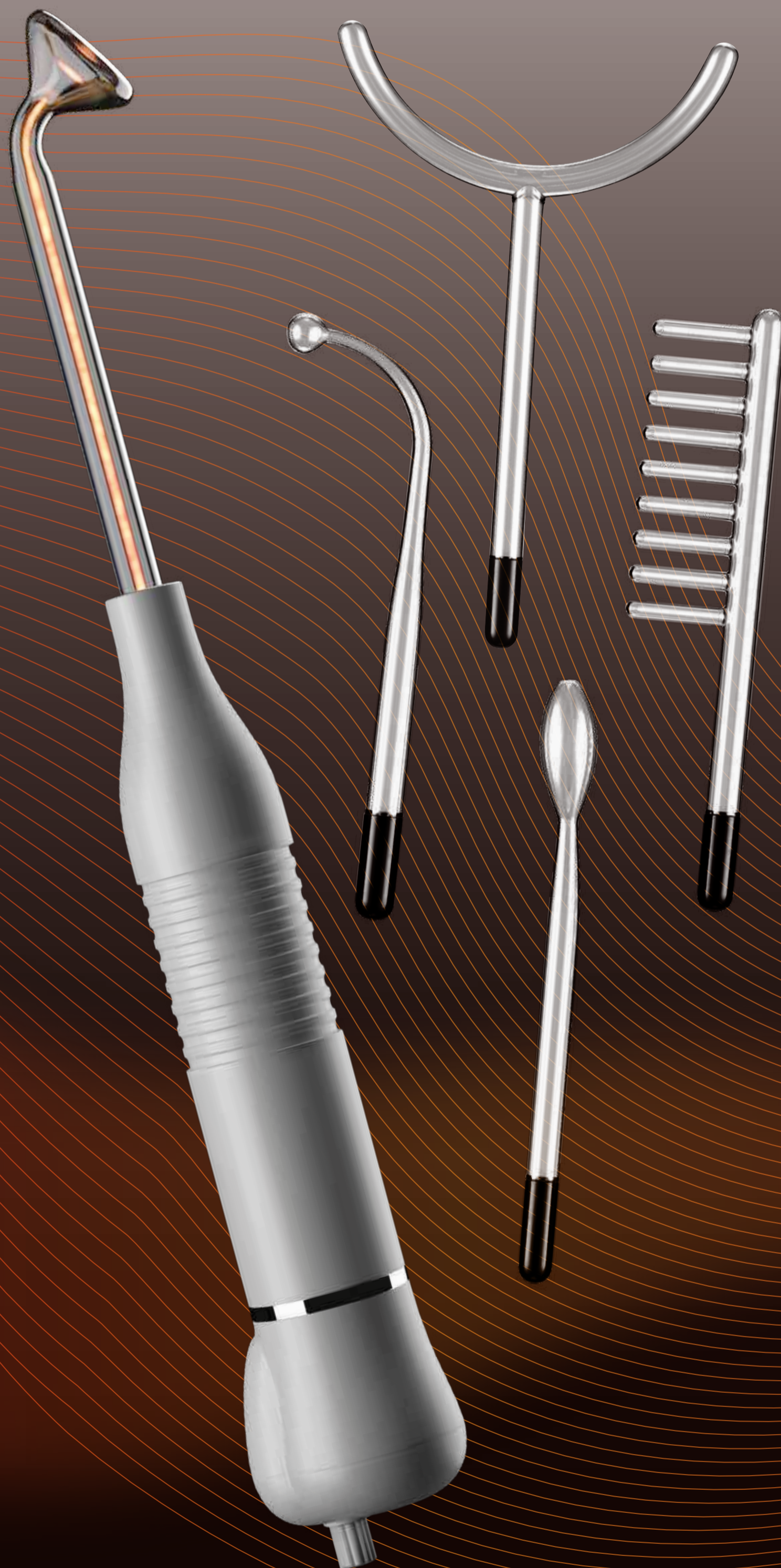

# Что такое Дарсонваль?

У вас в руках современный физиотерапевтический прибор, принцип работы которого был изобретен в XIX веке во Франции. Дарсонваль воздействует на тело импульсами переменного тока высокой частоты (215 МГц) и малой силы (100-300 мА).

Благодаря высокочастотному электрическому воздействию наблюдаются значительные изменения в области обмена веществ, кровоснабжения и оксигенации (насыщения кислородом) кожи, повышения тонуса тканей.

## Техника безопасности

**Внимательно изучите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.**

- 1** Не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью. Не рекомендуется проводить процедуру в ванных комнатах и бассейнах. Не берите аппарат, включенный в розетку, мокрыми руками.
- 2** Перед тем, как подключить аппарат к сети, убедитесь, что стеклянные электроды, корпус аппарата и изоляция сетевого шнура в хорошем состоянии. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, то не используйте аппарат, так как это может быть опасно.
- 3** Не используйте аппарат, если на его корпус попала вода или другие жидкости. Чтобы убрать жидкость, аккуратно протрите корпус мягкой тканью или салфеткой.
- 4** Не разбирайте аппарат и не пытайтесь выполнять какие-либо другие процедуры, не указанные в нашей инструкции.
- 5** Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном детям.
- 6** Не вставляйте посторонних предметов в гнездо, предназначенное для электродов, включая электроды сторонних производителей. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

**Примечание:** вы можете приобрести электроды сторонних производителей только по рекомендации нашего технического специалиста.

- 7** Не оставляйте прибор в неустойчивом положении, избегайте падений прибора и его механических повреждений.
- 8** Замена насадок производится только в выключенном приборе.
- 9** Аккуратно обращайтесь со стеклянными насадками. Они выполнены из медицинского стекла, но при сильном механическом воздействии могут разбиться.
- 10** Не роняйте насадки и храните их в коробке. После процедуры протирайте сухой салфеткой.

# Меры предосторожности

Перед началом дарсонвализации следует убедиться, что на электроде (стеклянной насадке), который вы планируете использовать, нет видимых повреждений, прибор сухой и чистый.

Перед началом работы проверьте, что аппарат выключен, то есть регулятор интенсивности выкручен на «0».

При работе с аппаратом нужно избегать излишнего давления на насадку. Начинайте процедуры с плавного увеличения интенсивности от 0 до необходимого значения.

## Рекомендации по использованию

Дарсонвализация производится на очищенной от косметики и грязи коже.

Перед началом процедуры рекомендуется снять все металлические и металлосодержащие украшения. Во время сеанса не прикасайтесь к металлическим поверхностям.

## Противопоказания

Аппарат для дарсонвализации не следует применять при:

- лихорадочном состоянии (при гриппе, ОРЗ, ОРВИ и т.д.)
- наличии злокачественных новообразований
- кровотечениях
- активном туберкулезе легких
- аритмии сердца
- эпилепсии
- наличии кардиостимулятора сердца
- беременности
- индивидуальной непереносимости электрического тока

Применение аппарата не требует специальных знаний и навыков. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией для правильного проведения процедур.

# ВАЖНО!

- 1** Во избежание избыточной стимуляции чувствительной кожи вы можете **использовать слой марли**, чтобы смягчить воздействие токов.
- 2** Максимальное время обработки любой точки на теле **не должно превышать 15 секунд**. Подразумевается, что вы можете вернуться к этой точке в течение сеанса, но не обрабатывайте одно и то же место больше 15 секунд подряд.
- 3** Не забывайте **выкручивать регулятор интенсивности на 0** после окончания процедуры. Убедитесь в том, что он стоит на нуле перед началом работы. Также проверьте перед началом работы, что насадка (электрод) установлена правильно.
- 4** При всех видах процедур следует избегать дарсонвализации участков кожи **с веснушками, родинок, новообразований любой этиологии**.
- 5** Пожалуйста, используйте прибор только по назначению, описанному в этой инструкции. **Правильная эксплуатация — залог безопасности.**

# Насадки и их применение

## Насадка-гребешок

Укрепляет корни волос, нормализует состояние кожи. Помогает при кожных заболеваниях головы. Минимизирует выпадение волос.

## Грибовидная насадка

Используется для тонизирующего массажа, борьбы с целлюлитом, разглаживает морщины, повышает эластичность кожи.

## Насадка-капля

Улучшает общее состояние кожи, помогает бороться с акне, постакне, угревой сыпью, мелкими мимическими и возрастными морщинами.

## Насадка-лепесток

Помогает привести кожу в тонус. Форма этой насадки позволяет регулировать площадь воздействия от точечного до более обширного.

## Насадка-дуга

Применяется для шейно-воротниковой зоны, рук, ног и ягодиц. Улучшает качество и упругость кожи. Лечение и профилактика болей.

Выделяют два основных типа процедур: **контактная** и **дистанционная дарсонвализация**.



### Контактная дарсонвализация

- аппарат соприкасается с поверхностью кожи, возникает тихий разряд
- для облегчения движения электрода используйте тальк или токопроводящие гели
- не используйте лосьоны, содержащие кислоты или спирт
- когда ток проходит через уходовые средства, их активные компоненты распадаются и проникают глубоко в кожу
- рекомендуем начинать процедуру с минимальной мощности, постепенно наращивая её

### Дистанционная дарсонвализация

- бесконтактный метод дарсонвализации рекомендуется для лифтинга кожи лица и для лечения зубной боли
- иногда дистанционную дарсонвализацию назначают для лечения обморожений или заживления ран/язв
- прибор следует при этом держать на расстоянии от 1 до 4 мм от поверхности кожи
- при использовании электрода на расстоянии формируется заряд, воздух наполняется озоном, а на участке тела ощущается покалывание
- продолжительность курса для лечения посттравматических, дерматитных и комбустиологических (ожоговых) поражений назначает лечащий врач



### Установка насадок

Отсканируйте qr-код или нажмите на него, чтобы посмотреть видео о правильной установке насадок

## Дарсонваль назначают в современных клиниках и физиокабинетах для:

нормализации работы сальных и потовых желез

снятия болевого синдрома и мышечных спазмов

ускорения процессов регенерации поверхностных тканей

общего омоложения кожи (нейтрализации значений pH, улучшения кровоснабжения и обмена веществ), подтяжки участков кожи

снятия постоперационных отеков и воспалений в пластической хирургии

лечения акне, язв различной этиологии, растяжек, целлюлита, рубцов

стимуляции роста волос и профилактики их выпадения

разглаживания морщин

борьбы с целлюлитом и дряблостью кожи

## ВАЖНО!

- 1** Для видимого результата необходимо пройти **полный курс процедур.**
- 2** Эффективный курс состоит из **10-15 массажей.**
- 3** Время проведения процедуры **зависит от участка кожи\тела.**
- 4** Среднее время процедуры на одном участке: **2-10 минут.**

## Насадка-капля



В первую очередь следует обработать воспаления: их **«прижигают» острием насадки**, применяя максимально интенсивный режим подачи тока **в течение 10-15 секунд** в зависимости от площади и глубины поражения.




После точечной обработки воспалений следует перейти к **обработке всей поверхности лица** контактным методом с применением грибовидной насадки.



Также грибовидную насадку можно использовать для обезжиривания кожи перед лечением высыпаний и акне.

Проводите насадкой по линиям — от носа, центра лба и подбородка к ушам. Один край электрода приподнимают над кожей, а другие — касаются ее.

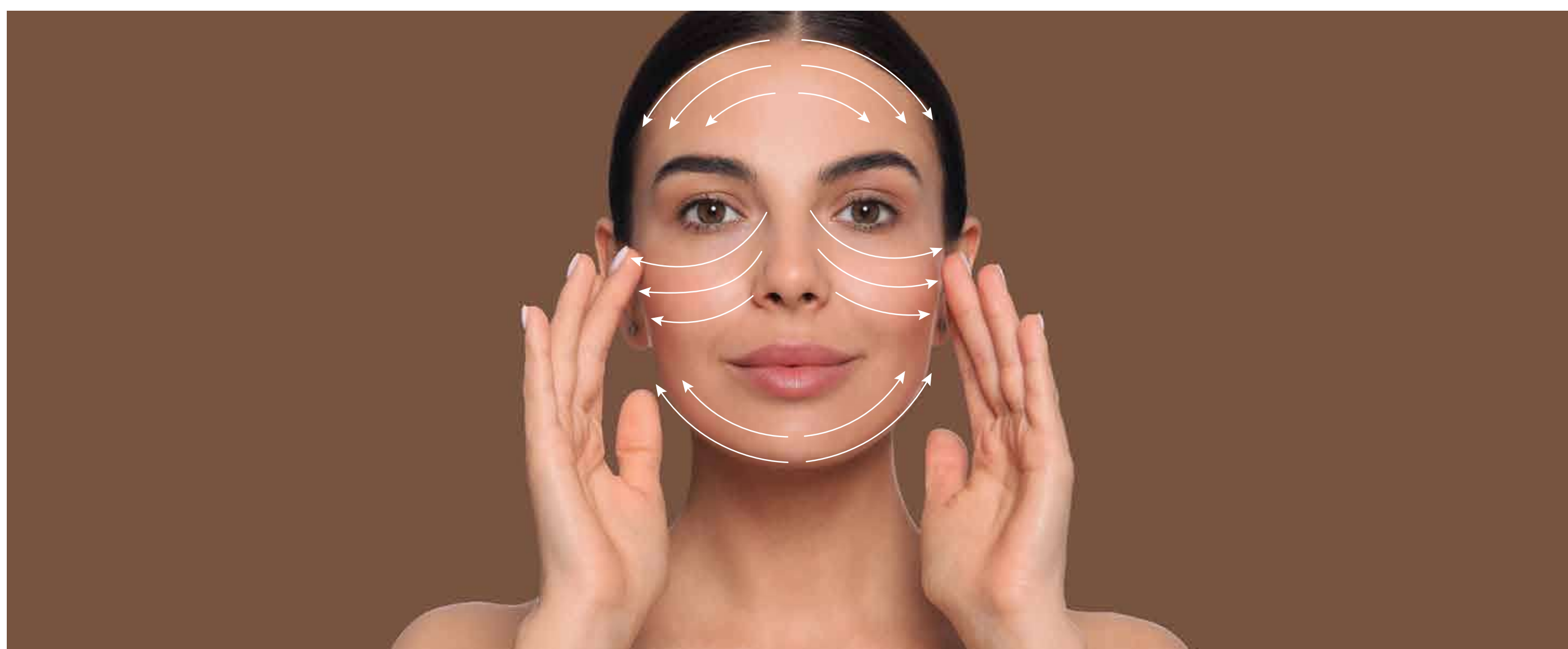



Использование прибора для проработки кожи головы и ухода за волосами

# Насадка-гребешок



Процедура проводится на чистой коже головы. Тщательно помойте, расчешите волосы и снимите все металлические украшения.

После процедуры используйте дополнительно уходовые маски, сыворотки для роста и против выпадения волос.



Электрод медленно перемещают ото лба к затылку по всей поверхности головы, постепенно повышая мощность тока до появления ощутимого покалывания, но не достигая болезненных ощущений.






# Грибовидная насадка

Предварительно очистите кожу, подсушите ее.  
Для усиления эффекта используйте токопроводящий гель.



Используя классические карты массажа для лица, проводите насадкой по коже по ходу массажных линий. **От центральной части лба — к линии роста волос, от крыльев носа — к вискам, от подбородка — к щекам, от ключиц — к подбородку.**

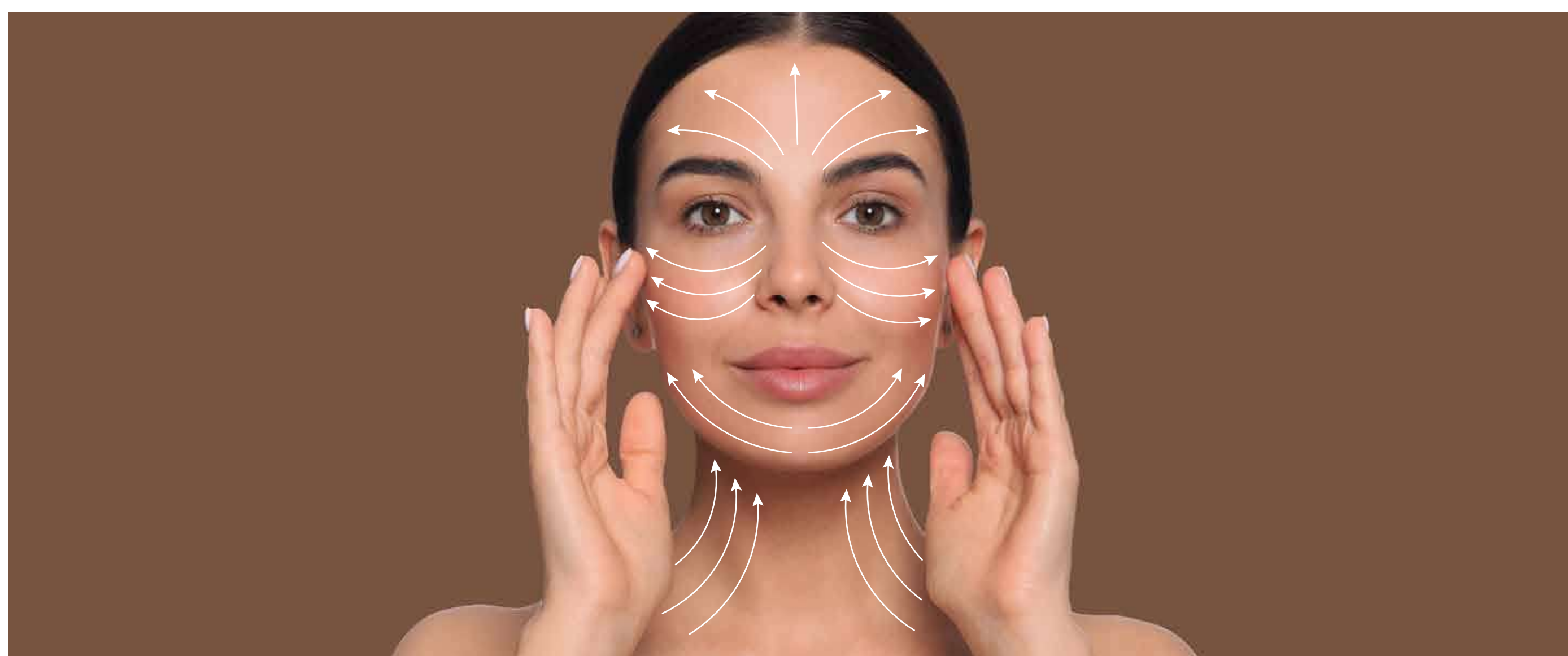

Для эффекта лифтинга используйте дистанционную дарсонвализацию на расстоянии от 1 до 4 мм между кожей и насадкой.

# Насадка-лепесток



Используйте насадку-лепесток вместе с дополнительными уходовыми средствами. Например, антицеллюлитным кремом. Регулируйте интенсивность от средней до высокой.



Проблемная зона обрабатывается контактным методом по массажным линиям. Поочередно проводим ей по каждой ноге, снизу вверх. **Выполняйте массажные движения от бедра к середине ягодицы.**



# Насадка-дуга



Процедура проводится на чистом теле. На шее не должно быть никаких металлических украшений.



**Необходимая зона обрабатывается контактным методом по массажным линиям.** Рекомендуем нанести уходовые средства по завершению процедуры



# Технические характеристики

Диапазон входного напряжения: 100 В ~ 260 В 50/60 Гц

Измерительное напряжение: 220 В 50 Гц

Входная мощность: 10 Вт

Материал стекла насадок: боросиликатное стекло

Размер: 33 x 21 x 6 см

Диаметр цоколя: 11 мм

Наша компания оставляет за собой право дополнять и изменять информацию без дополнительного уведомления покупателей.

**Гарантия**  
**6 месяцев**

