


ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА

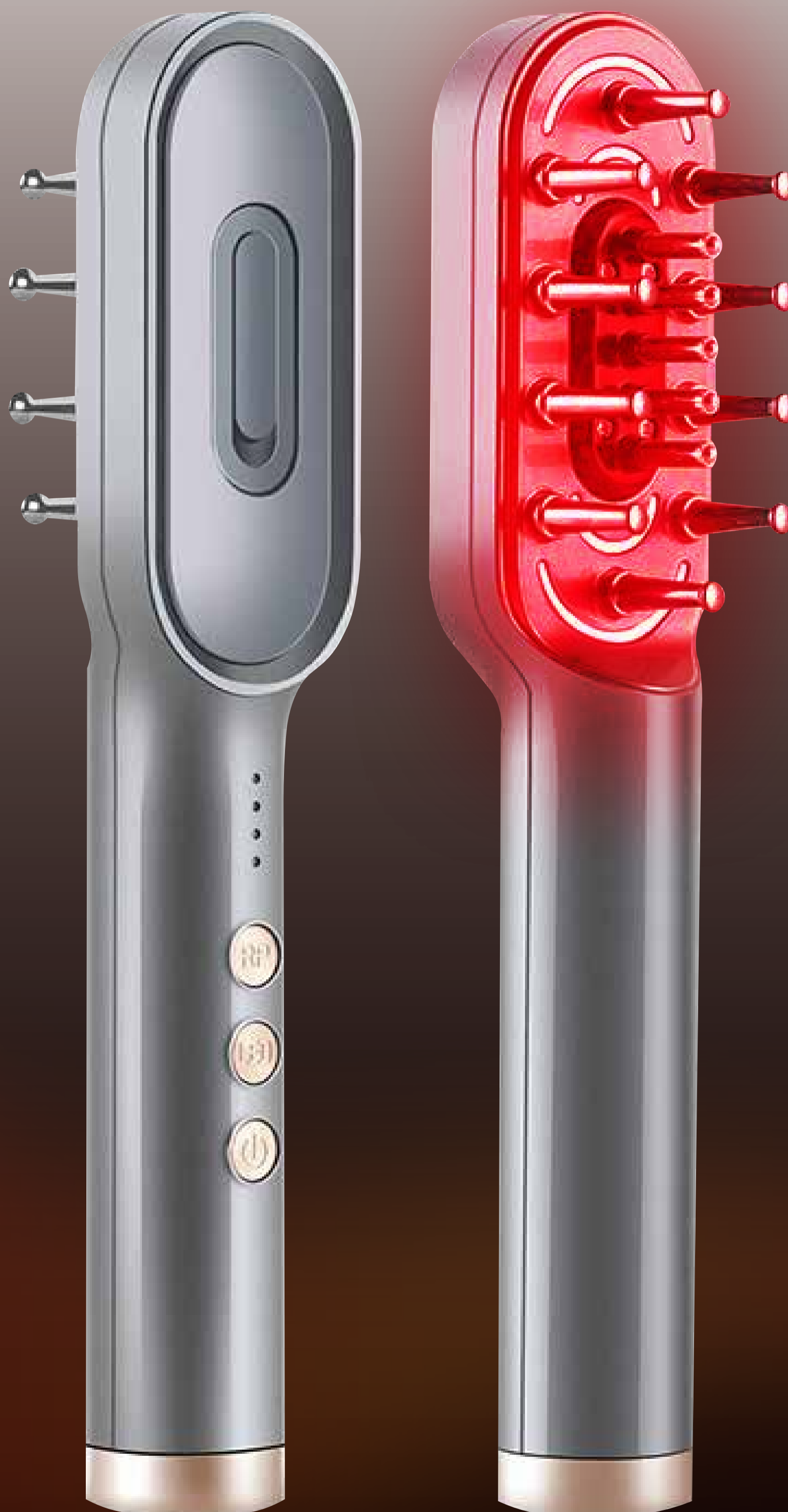

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для дальнейшего использования. Неправильное обращение с расческой может привести к ее поломке, причинению вреда пользователю или имуществу, а также аннулированию гарантии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1** Избегайте попадания лазерного излучения на сетчатку глаза.
- 2** Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не рекомендуется проводить процедуру в ваннах, саунах и бассейнах. Следите за тем, чтобы на расческу не попадала вода и сторонние жидкости.
- 3** Исключите любые механические воздействия на прибор.
- 4** Не разбирайте прибор самостоятельно. В случае обнаружения неисправности обратитесь в отдел технической поддержки.
- 5** При дискомфорте во время процедуры немедленно прекратите использование расчески.

❗ ВАЖНО

Перед первым использованием проверьте действие расчески на небольшом участке кожи.

После проведения сеанса на коже могут наблюдаться небольшие покраснения. Это нормально, так как разгоняется кровообращение. Также в рамках нормы не сильные покалывания при использовании. Если вышеописанные ощущения не проходят в течение нескольких часов или вы испытываете дискомфорт другого характера, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед следующим сеансом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Выпадение волос (в результате стресса или химических/механических повреждений);
- Чрезмерно сухая или жирная кожа головы;
- Перхоть, себорея, алопеция;
- Возрастные изменения и ослабленные волосы с поврежденной структурой;
- Зуд, дискомфорт на коже головы;
- Нарушение кровообращения, недостаток кислорода у волосяных фолликулов;
- Также прибор можно использовать в профилактических целях. Лазерная расческа способствует укреплению волос и ускорению их роста.

ⓘ ВАЖНО

Эффективность процедур зависит от исходного состояния волос, состояния здоровья, возраста и регулярности применения. При наличии заболеваний кожных покровов рекомендуем проконсультироваться с трихологом перед применением.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Онкологические заболевания;
- Беременность;
- Хронический дерматит или дерматоз в стадии обострения;
- Аллергические реакции на кожу в месте воздействия прибора;
- Нарушения сердечного ритма, наличие электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов;
- Гипертония;
- Эпилепсия;
- Психические заболевания;
- Туберкулез;
- Нарушения кожной чувствительности;
- ОРВИ, грипп, повышенная температура;
- Воспалительные процессы на коже головы.

ⓘ ВАЖНО

Запрещено использование прибора в сочетании с гормональными средствами для стимуляции роста волос.


ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

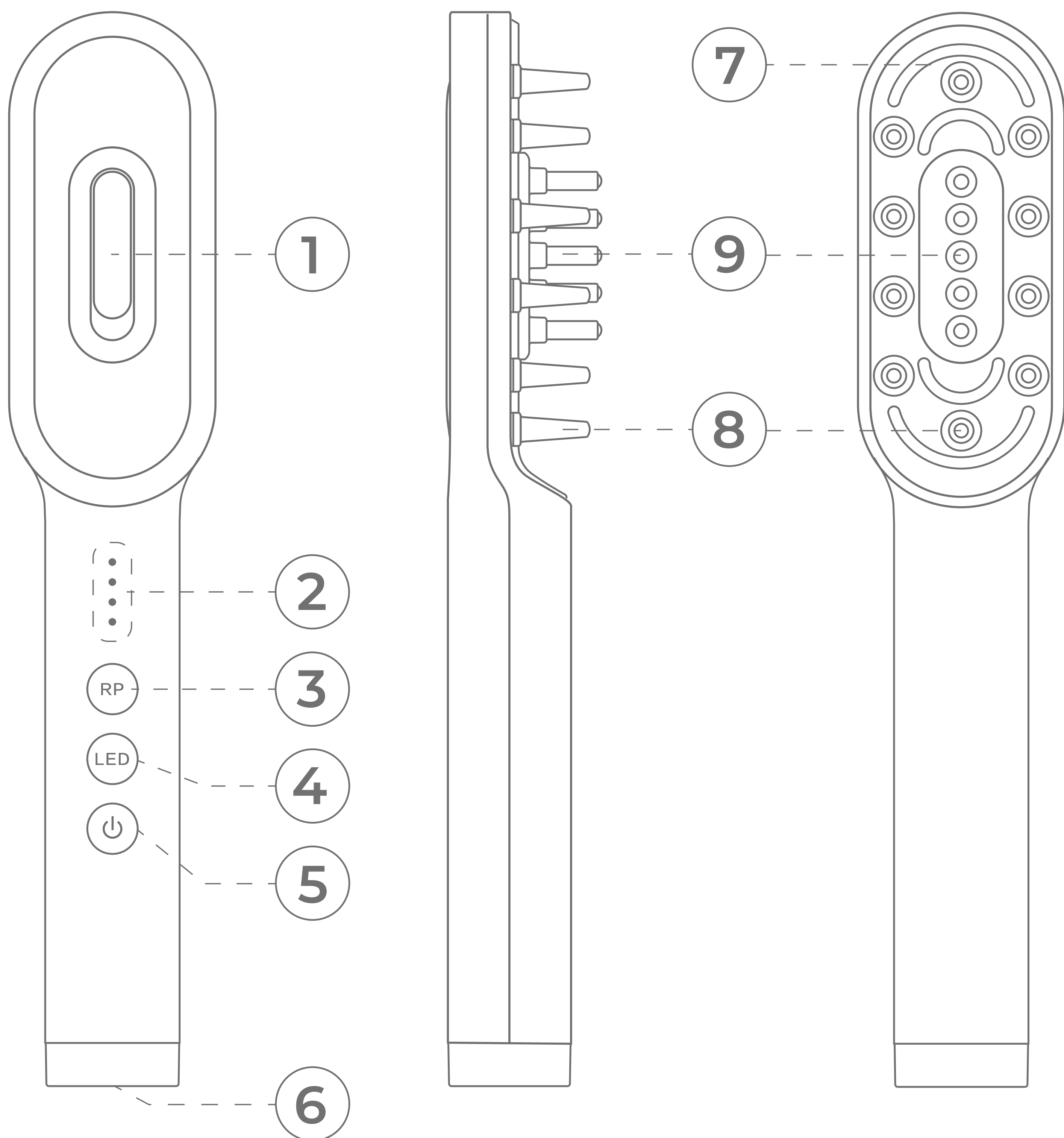

- ❶ Резервуар для дополнительных уходовых средств (сыворотки, лосьоны и т.д.)
- ❷ Индикатор интенсивности электрического импульса
- ❸ Выбор режима
- ❹ Выбор световой терапии
- ❺ Кнопка включения/выключения
- ❻ Порт для зарядки
- ❼ Светодиодные кольца
- ❽ EMS-электроды (10 шт.)
- ⚠ Используйте расческу вместе с лосьоном или сывороткой.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

- Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки расческой пользоваться нельзя.
- Световой индикатор сигнализирует о состоянии заряда (см. рисунок ниже).
- Время заряда: 2-2,5 часа.
- Время автономной работы при полном заряде: 70 минут. Автовыключение: через 10 минут.

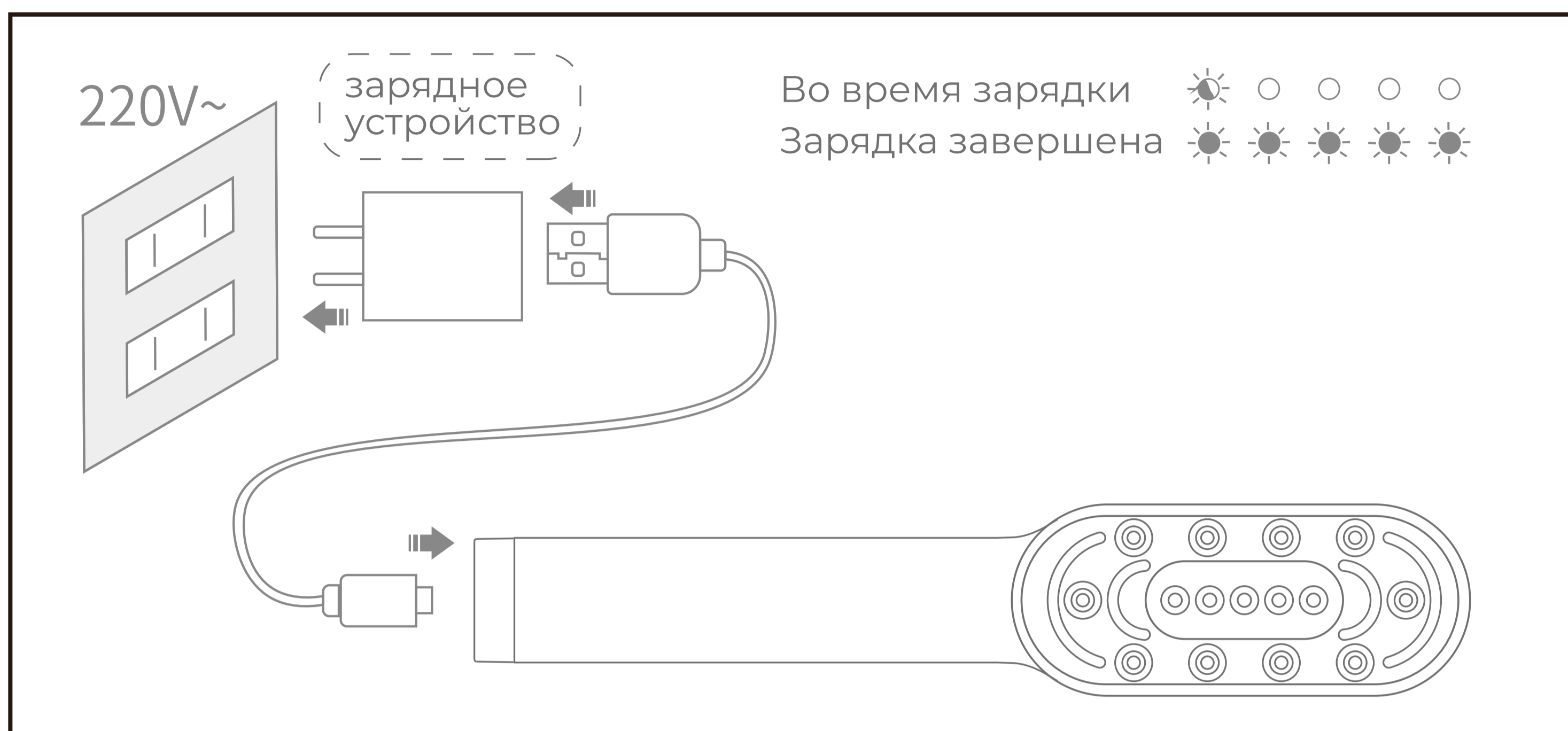


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 Тщательно протрите расческу и зубчики сухой салфеткой.
- 2 Процедура должна выполняться на чистых и сухих волосах.
- 3 Возьмите лосьон или сыворотку для роста волос и заполните емкость, ориентируясь на рисунок:




1. Одним нажатием на него достаньте резервуар, откройте резиновую крышку и заполните его сывороткой или лосьоном (на 3 мл., не более). Убедитесь, что крышка плотно закрывает ее после наполнения.

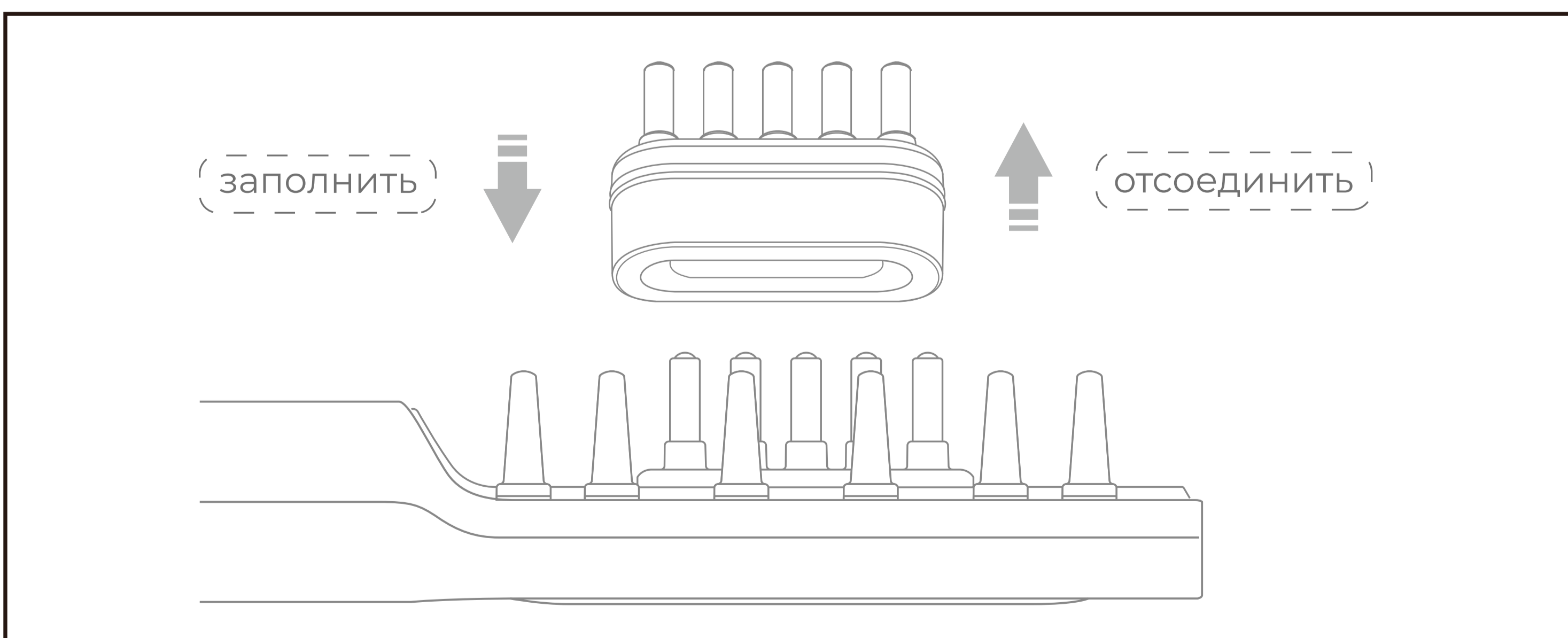

2. Вставьте резервуар в расческу.

ⓘ После этого вы можете слегка надавить на зубчики рукой, чтобы проверить факт выделения средства.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

- 1 Нажмите кнопку , чтобы включить прибор. Индикатор загорится фиолетовым цветом, а уровень интенсивности по умолчанию равен 1.

❗ ВАЖНО

Во время первого сеанса лучше остановиться на первом уровне интенсивности, чтобы отследить реакцию кожи головы. Увеличивать ее лучше постепенно.

- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из четырех режимов светотерапии:

РЕЖИМ	ВРЕМЯ СЕАНСА	ЭФФЕКТ
Синий	10 минут	Защищает кожу головы от внешних воздействий и укрепляет местный иммунитет
Красный	10 минут	Активизирует рост волосяных фолликулов, ускоряет кровообращение, влияет на рост волос
Синий+красный	10 минут	Стимулирует деление клеток, укрепляет структуру волоса
Мигающий	10 минут	Глубоко питает кожу головы

❗ Светодиодные режимы также можно использовать отдельно после сеанса, проведенного с лосьоном или сывороткой. Это повысит эффективность впитывания средства.

- 3 Расчесывайте волосы медленными плавными движениями в направлении от лба и висков к затылку. Следите за тем, чтобы был прямой контакт с кожей головы.



❗ Рекомендуемая частота сеансов: 1 раз в день, минимальный интервал между ними — 5 часов.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Всегда выключайте устройство во время его очищения;
- Избегайте попадания на расческу воды или других жидкостей, не мойте ее под проточной водой;
- Аккуратно протирайте расческу и зубчики сначала мягкой влажной салфеткой или медицинским спиртом, а затем — сухой салфеткой;
- После каждого сеанса доставайте емкость для уходового средства и убирайте его остатки влажной салфеткой. Не забывайте протирать зубчики после каждой процедуры, на них могут быть остатки лосьона;
- Если вы не планируете пользоваться прибором продолжительное время, то доставайте его каждые 2 месяца и заряжайте аккумулятор.

АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как обращаться в службу технической поддержки, проверьте по разделу характер неисправности и попытайтесь выполнить указанные действия.

ПРОБЛЕМА 1

Нет никаких ощущений во время использования расчески.
Не чувствую покалывания.

ПРИЧИНА

Физические ощущения от сеанса могут быть только в том случае, если у вас чувствительная кожа головы или выбрана высокая интенсивность процедуры. Отсутствие покалывания не говорит об отсутствии эффекта, это не связанные вещи.

РЕШЕНИЕ

Попробуйте увеличить интенсивность процедуры и проанализировать свои ощущения.

ПРОБЛЕМА 2

Расческа не включается.

ПРИЧИНА

Скорее всего, разрядился аккумулятор ввиду того, что прибор не использовался продолжительное время, или вы не зарядили расческу после последнего использования.

РЕШЕНИЕ

Зарядите аккумулятор полностью. Убедитесь в том, что индикатор заряда говорит о том, что расческа готова к использованию.

ПРОБЛЕМА 3

Расческа не заряжается.

ПРИЧИНА

1. Проблемы с розеткой или адаптером.
2. Поврежден usb-провод.

РЕШЕНИЕ

1. Попробуйте заменить оба варианта и проверить, идет ли заряд.
2. Замените его.

ПРОБЛЕМА 4

Расческа автоматически выключается во время сеанса.

ПРИЧИНА

1. Разрядился аккумулятор.
2. Причина в функции автоматического выключения спустя 10 минут. Это встроенная функция, направленная на безопасность использования.

РЕШЕНИЕ

1. Выключите прибор и поставьте его на зарядку.
2. Включите расческу заново и продолжайте процедуру.

ПРОБЛЕМА 5

Не выделяется сыворотка или лосьон во время процедуры.

ПРИЧИНА

1. Закупорились отверстия для выделения дополнительного средства.
2. Допустимое количество сыворотки или лосьона превышает 3 мл.
3. Концентрация вашего средства слишком высока.

РЕШЕНИЕ

1. Протрите их медицинским спиртом и убедитесь, что они хорошо очищены.
2. Убедитесь, что вы не заполнили резервуар полностью.
3. Разбавьте его или замените другим.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микротоковая лазерная расческа — 1 шт

Usb-провод для зарядки — 1 шт


Инструкция на русском языке — 1 шт

Коробка — 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность:	6 Вт
Напряжение:	3,7 В
Источник питания для зарядки:	5В/1А
Вес:	123 гр
Размер:	215 мм*35 мм*43 мм
Объем резервуара для доп средств:	3,6 мл

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

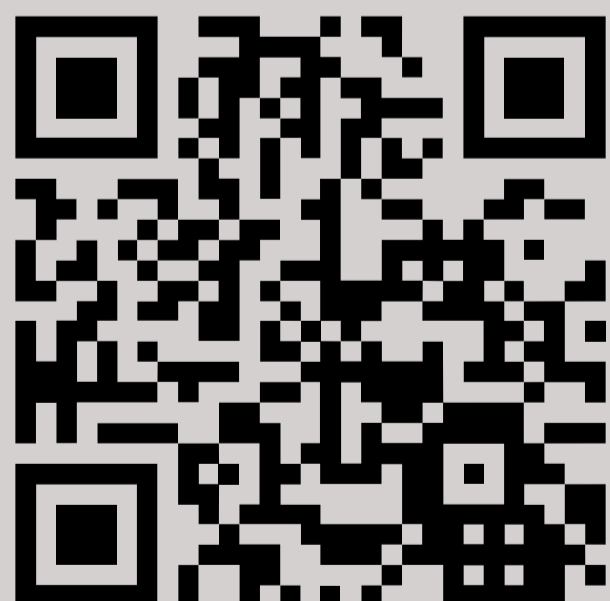

ДРУГИЕ ТОВАРЫ НАШЕГО БРЕНДА

Нажмите на Qr-код
или отсканируйте его

