

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# АППАРАТ МЕЗОТЕРАПИИ RF И EMS



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ВВЕДЕНИЕ

Массажер для RF-лифтинга — это удобный, многофункциональный и эффективный аппарат для ухода за кожей лица и тела в домашних условиях.

Он включает в себя пять методик, каждая из которых позволяет косметологическим и космецевтическим средствам проникать в глубокие слои кожи, тем самым питая и увлажняя её.

Аппарат подходит как для антивозрастного ухода и подтяжки лица, так и для улучшения мышечного тонуса и состояния кожи в любом возрасте.

Вы можете проводить профессиональные процедуры, не выходя из дома, при этом экономя время и бюджет, а эффект останется неизменным.

С помощью кнопок можно регулировать интенсивность каждой процедуры, а функции будут объединяться, оказывая накопительный эффект.

Залог видимого эффекта и достижения гладкой и эластичной кожи — регулярность применения и правильность выполнения процедур. Пожалуйста, не забывайте об этом и внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными ниже.

# ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК



- 1 Подставка
- 2 Разъем для зарядки USB Type-c
- 3 Металлические электроды (манипулы)
- 4 Светодиодные излучатели
- 5 ЖК-дисплей
- 6 Кнопка включения/выключения/  
интенсивности воздействия
- 7 Кнопка выбора цвета светотерапии
- 8 Индикатор заряда

# ФУНКЦИИ И МЕТОДИКИ АППАРАТА

## RF-лифтинг (мезопорация)

Подтяжка овала лица, повышение упругости кожи **БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ.**

Благодаря радиочастотным волнам улучшается проникновение активных компонентов уходовых средств. Они проникают в глубокие слои кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина.

Регулярное проведение этой процедуры стимулирует процессы обновления, усиленной регенерации клеток.

## Электропорация

Питание и увлажнение кожи на клеточном уровне, ускорение видимости результата, увеличение проницаемости клеточных мембран.

С помощью высокочастотных электрических импульсов открываются проводящие каналы в клетках, а это обеспечивает интенсивное усвоение космецевтических средств.

## EMS

Снятие отечности, улучшение микроциркуляции крови и лимфотока, снятие спазмов, уменьшение следов постакне, устранение мимических морщин, профилактика появления первых возрастных изменений кожи.

Микротоки стимулируют мышцы лица. Электромиостимуляция восстанавливает естественную работу лицевых мышц, устраняя зажимы и скованность.

## Светотерапия

Свет разных цветов оказывает интенсивное воздействие на структуру кожи. В зависимости от цвета варьируется интенсивность проникновения света в глубокие слои кожи.







# РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ЦВЕТА

Чтобы включить массажер, нажмите кнопку POWER.

В левом верхнем углу находится индикатор мощности (5 уровней), регулируйте мощность дополнительными нажатиями кнопки POWER (1 нажатие = 1 уровень, 2 нажатия = второй уровень, и т.д.).



Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите на кнопку “Выбор света” нужное количество раз:

-  1 нажатие — красный свет
-  2 нажатия — зеленый свет
-  3 нажатия — синий свет
-  4 нажатия — оранжевый свет
-  5 нажатий — розовый свет
-  6 нажатий — розовый мигающий свет

Для выключения массажера нажмите 6 раз на кнопку POWER.



## Красный свет

Активизация выработки коллагена и эластина, уменьшение мимических морщин.



## Зеленый свет

Уменьшение покраснений и раздражения, укрепление сосудов, осветление пигментации.



## Синий свет

Антибактериальное и антисептическое действие, сокращение воспалений.



## Оранжевый свет

Лимфодренажное действие, устранение отеков, повышение тонуса мышц.



## Розовый свет

Улучшение цвета лица, качественное увлажнение кожи, тонизирование и лифтинг-эффект.



## Розовый мигающий свет

Усиление эффекта от косметологических и космецевтических средств.


# РЕКОМЕНДАЦИИ

## Зарядка массажера

- 1 Перед первым использованием полностью зарядите массажер. Среднее время зарядки: 4 часа.
- 2 Во время зарядки массажер должен быть плотно зафиксирован на подставке. Индикатор красного цвета даст понять, что заряд идет.

## Эксплуатация

- 1 Снимите все металлические украшения.
- 2 Обработайте массажер антисептическим средством.
- 3 Смойте косметику и тщательно очистите кожу.
- 4 Нанесите увлажняющий крем/гель/сыворотку. Дождитесь полного впитывания.
- 5 Нанесите на кожу токопроводящий гель/сыворотку/эссенцию. Это повысит эффективность процедуры благодаря улучшению токопроводимости. Рекомендуется наносить средство на зоны постепенно (нанести — провести процедуру на этой зоне — нанести средство на другую зону).
- 6 Нажмите кнопку включения и выберите необходимую интенсивность процедуры. Рекомендуется начинать процедуру с первого уровня мощности.
- 7 Проводите процедуру по массажным линиям, избегая области вокруг глаз.
- 8 Закрепите волосы заколкой, чтобы они не мешали вам во время процедуры.

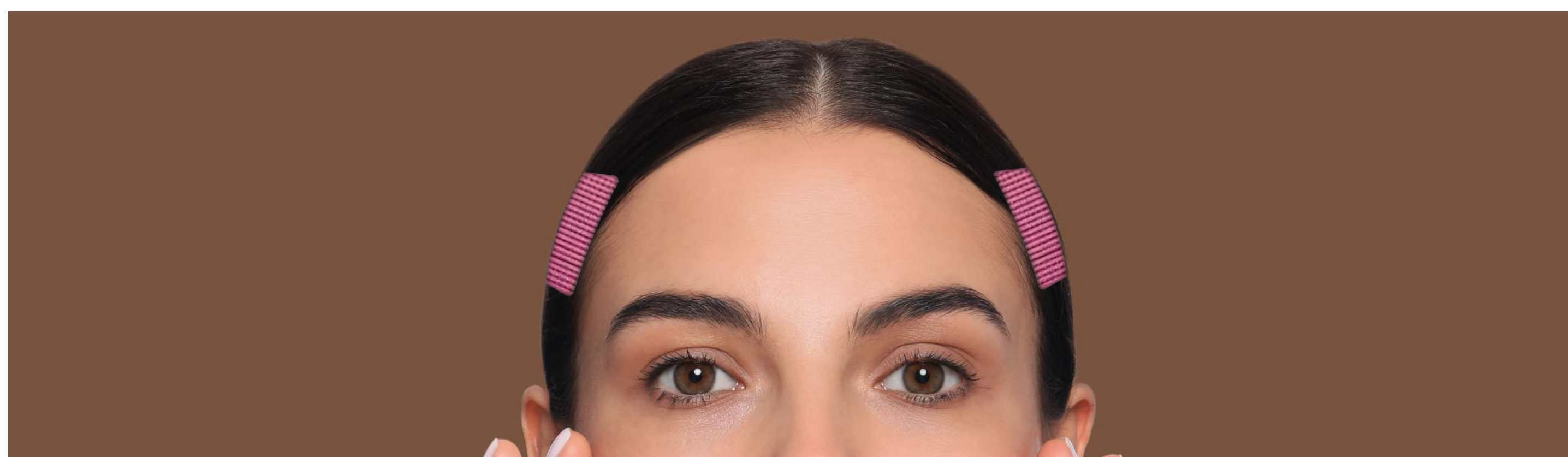

### **⚠ Важно!**

Во время процедуры могут ощущаться легкие покалывания. Это нормально. Выбирайте комфортный для себя режим интенсивности, чтобы не испытывать болевых ощущений. Если у вас очень чувствительная кожа, рекомендуется использовать влажные салфетки из нетканного материала или марлю во время процедуры.

Также во время или после процедуры могут появиться небольшие покраснения, они пройдут в течение часа после завершения после процедуры, это нормальная реакция кожи на воздействие микротоками.


## Уход за увядающей кожей

- Во время процедуры используйте сыворотки с коллагеном или специальные гели для лифтинга. Это поможет улучшить состояние кожи и уменьшить количество морщин.
- После процедуры наносите на кожу маски с пептидами, матриксиллом или гиалуроновой кислотой.

Правильный уход за кожей поможет сохранить её молодость и красоту, а также предотвратить появление новых несовершенств.


# ЗОНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАССАЖЕРОМ

## Подбородок и нижняя часть лица

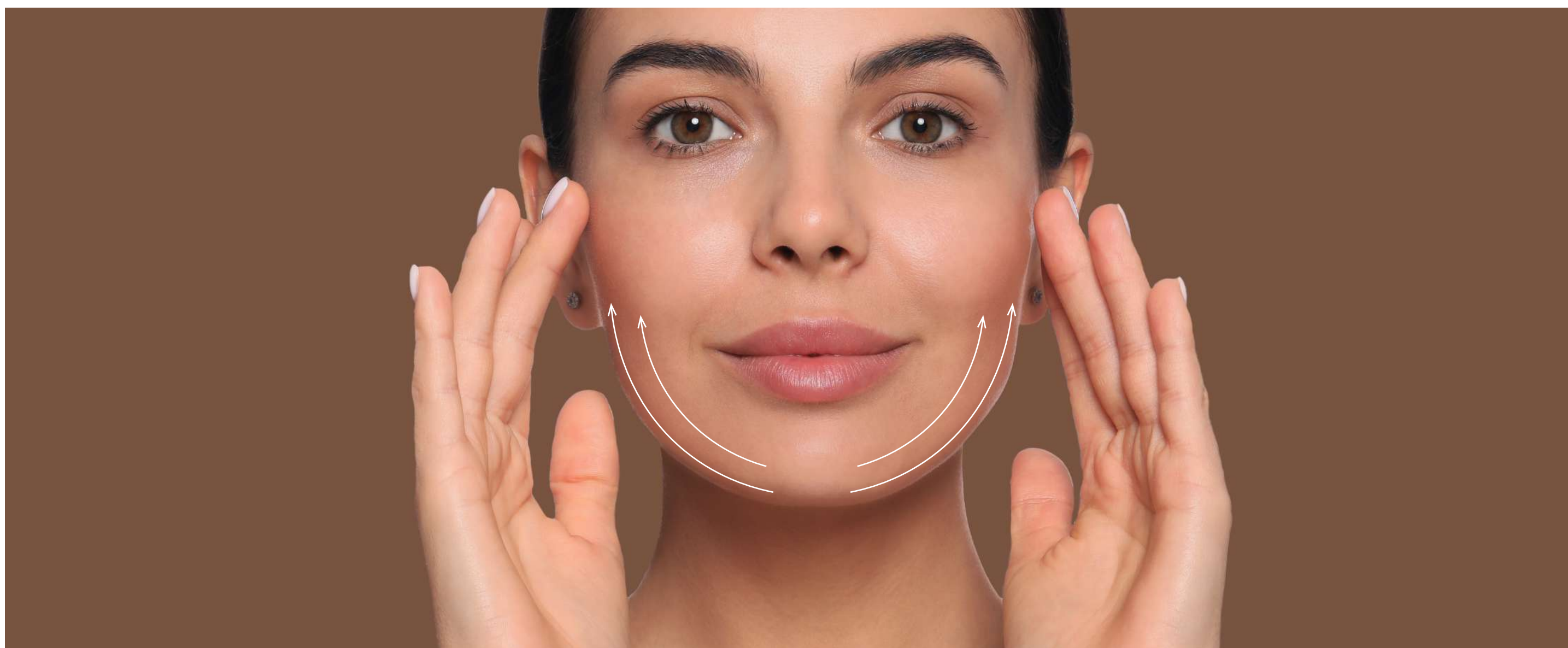


Перемещайте массажер по массажным линиям от подбородка к мочке уха.

## Щеки

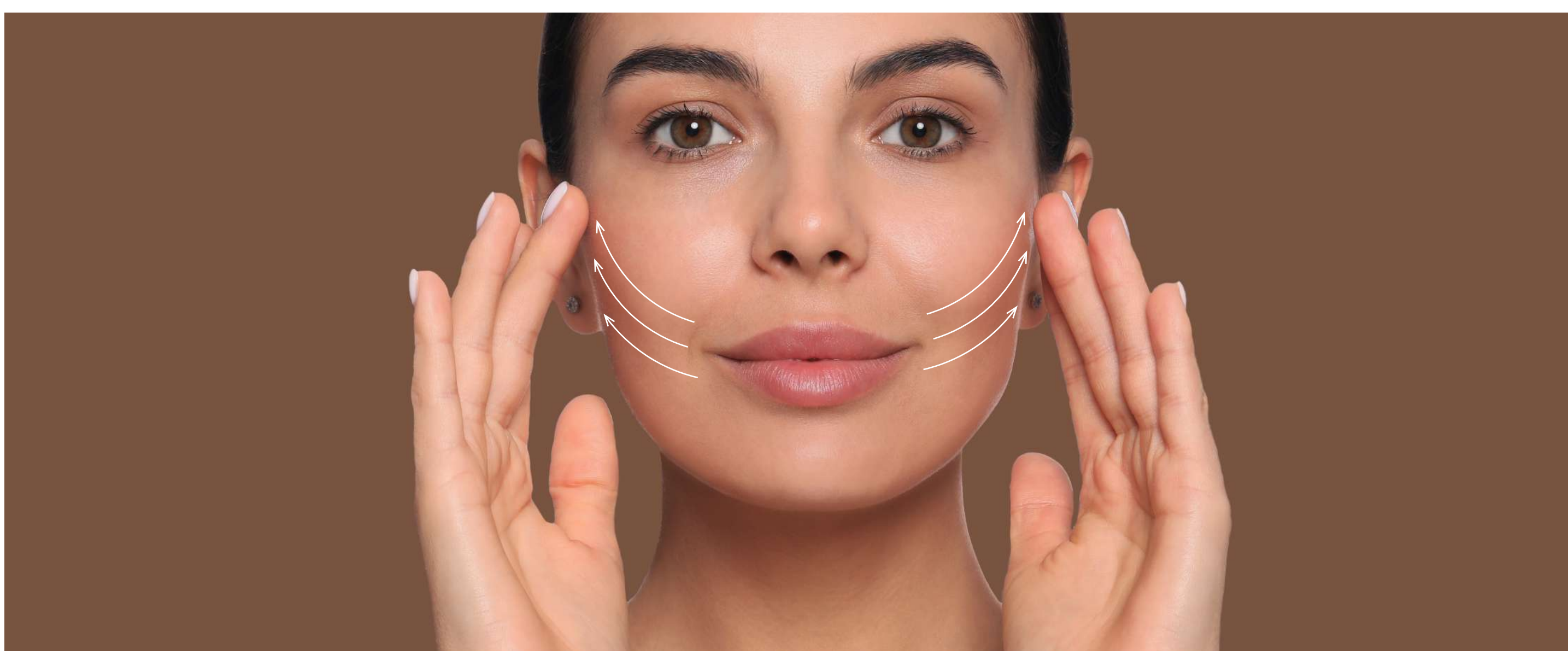

Расположите массажер у уголка губ и медленно перемещайтесь по массажным линиям по направлению к скулам.


## Носогубные складки

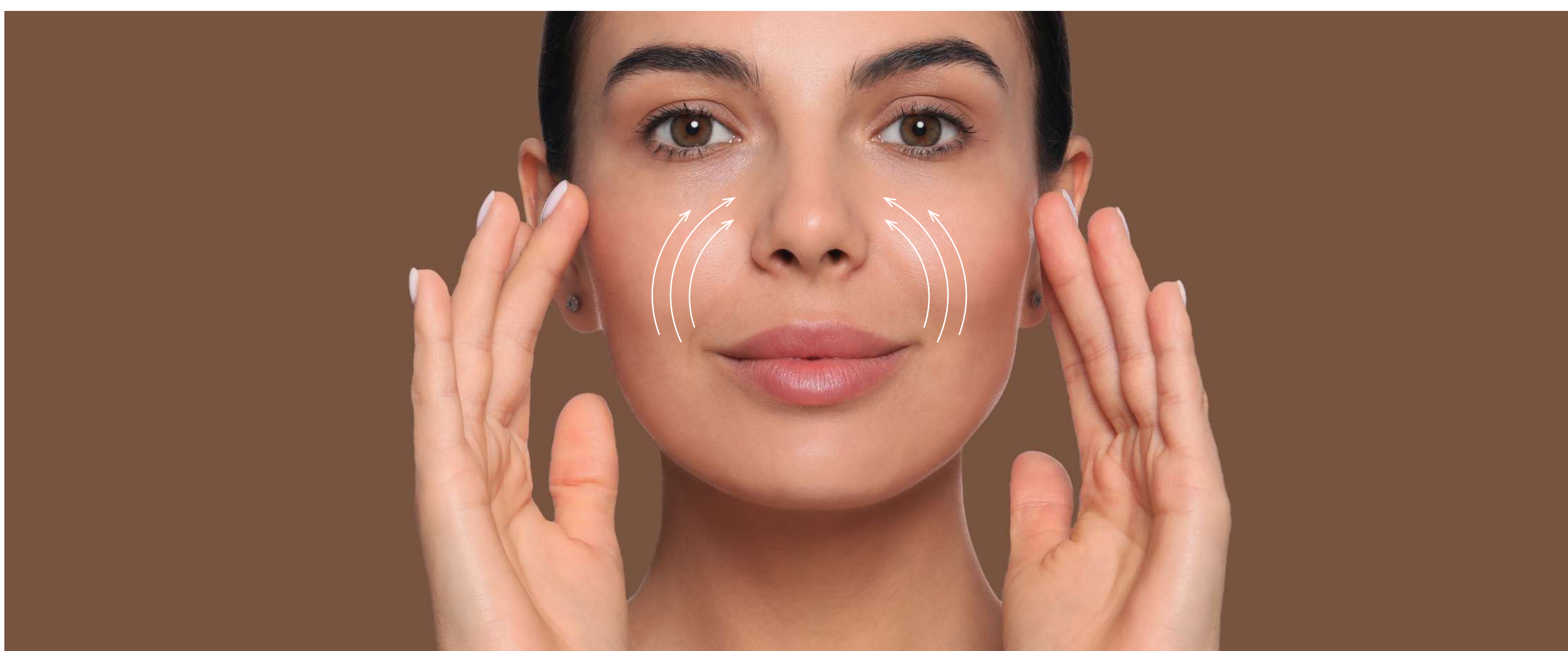

Расположите массажер у уголка губ и медленно перемещайтесь по массажным линиям по направлению от дуги к носу.




## Шея

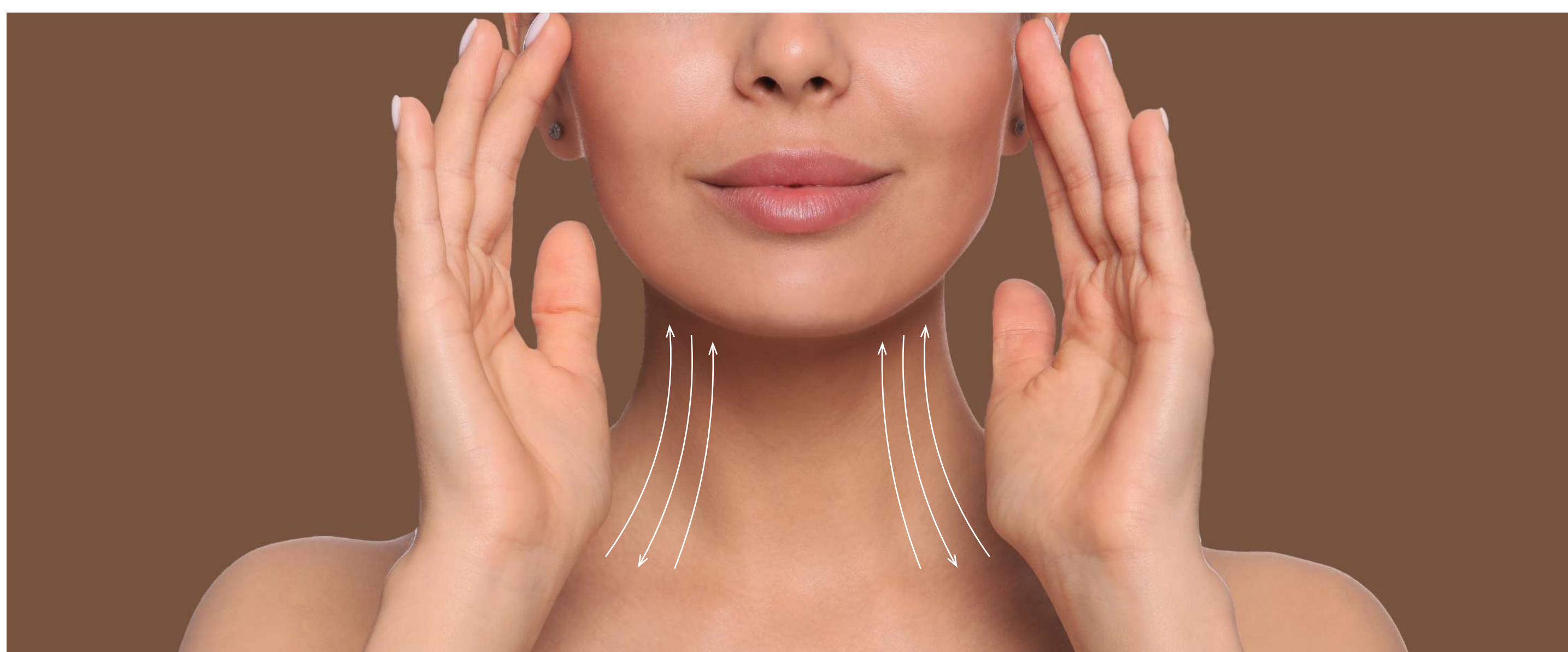



Расположите массажер сбоку шеи. Медленно перемещайте его по массажным линиям вверх-вниз. Повторите процедуру с другой стороны.

## Контурирование овала лица

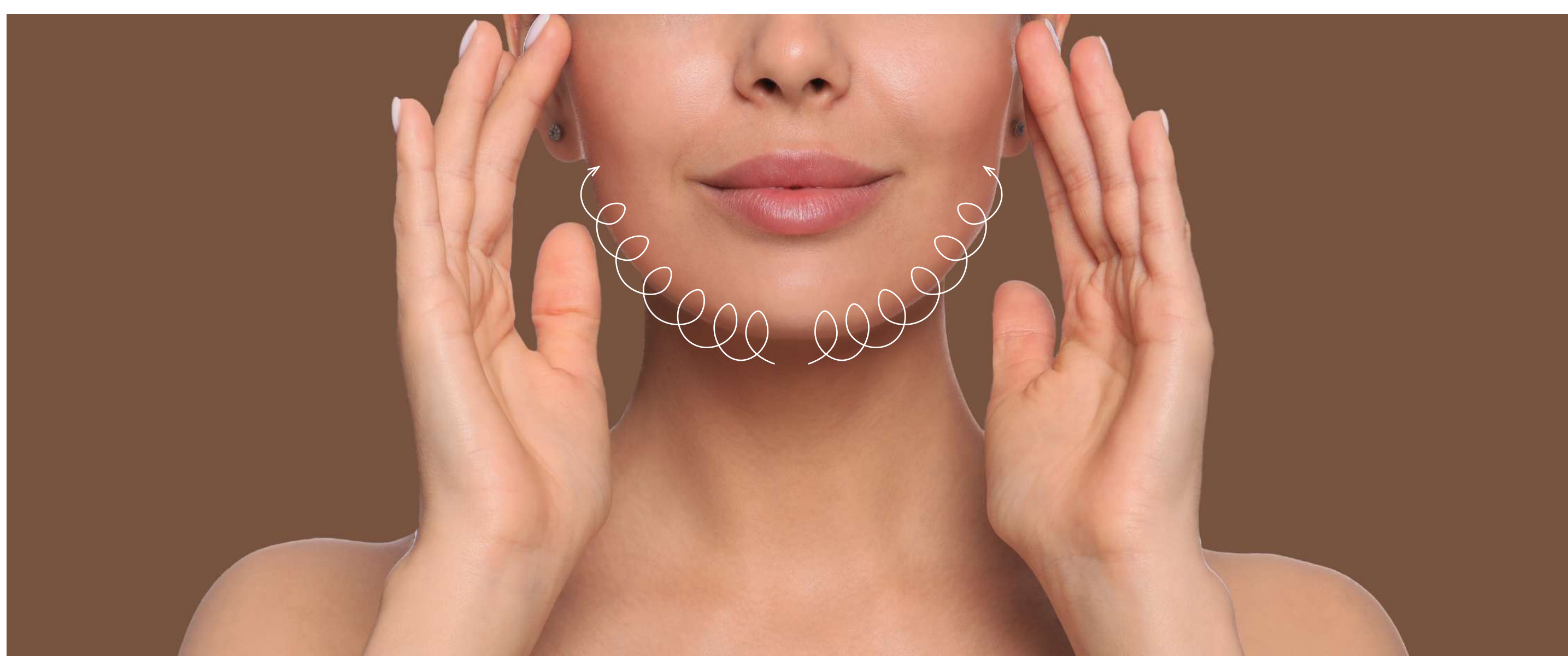


Расположите массажер под подбородком, в центре. Медленно перемещайте его круговыми движениями от центра подбородка к периферии.

## Живот

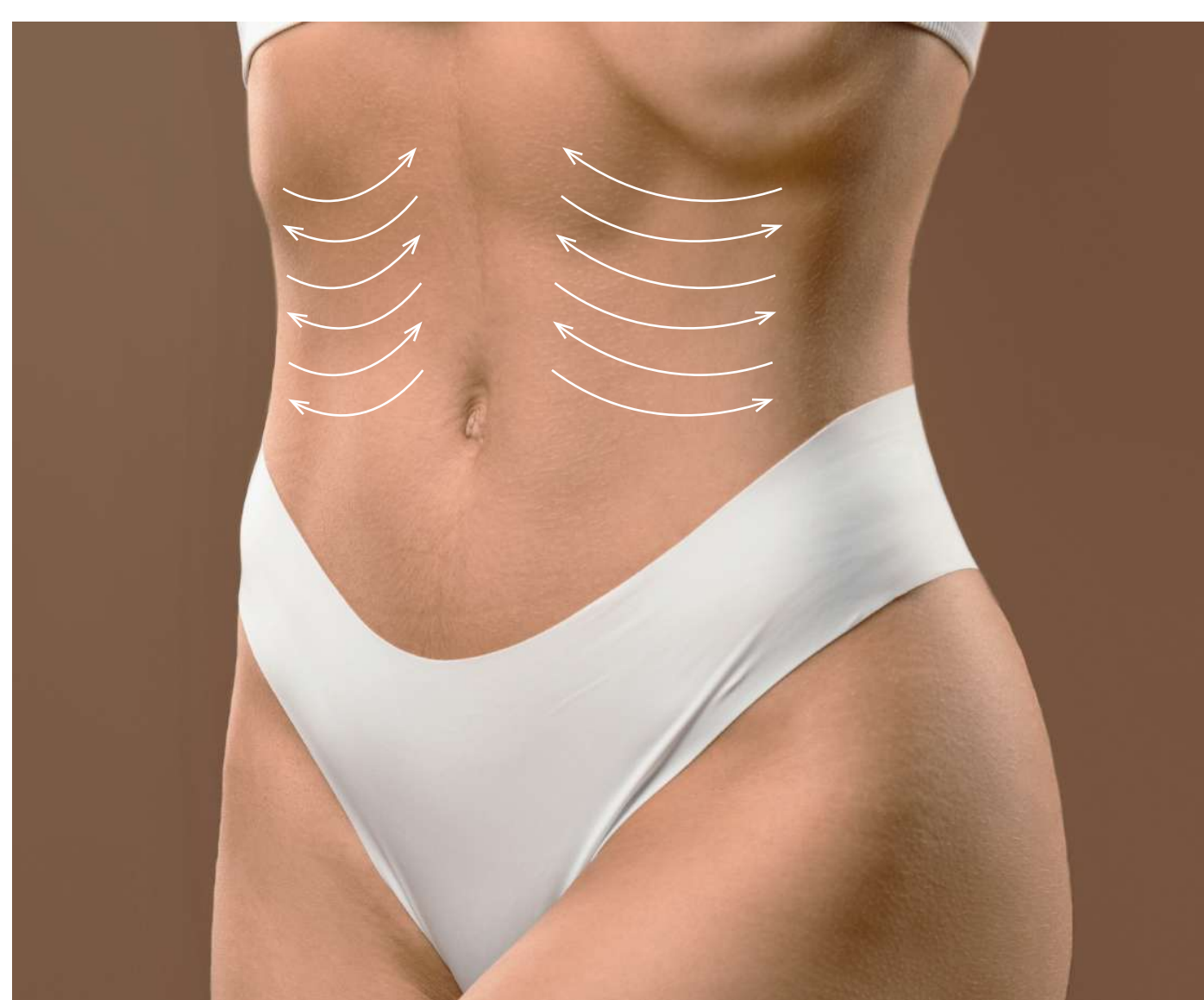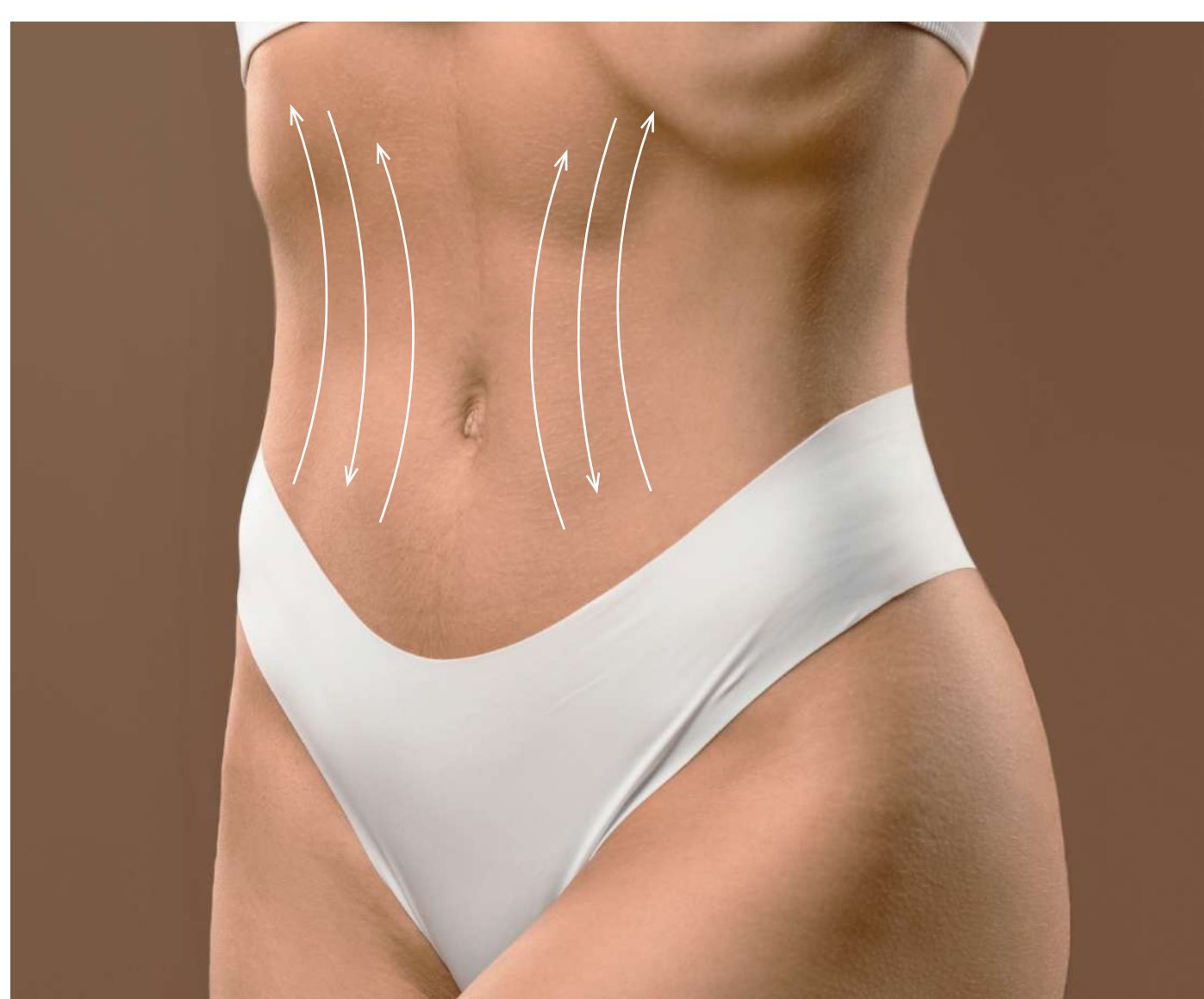

- 1** Расположите массажер плотно к зоне живота и выполняйте массажные движения согласно линиям на рисунке — сверху вниз и снизу вверх. Не задерживайтесь долго на одном месте.
- 2** Расположите массажер перпендикулярно животу в области талии. Медленно перемещайте его по направлению к бокам согласно массажным линиям.

## Бедра (задняя и передняя поверхность)

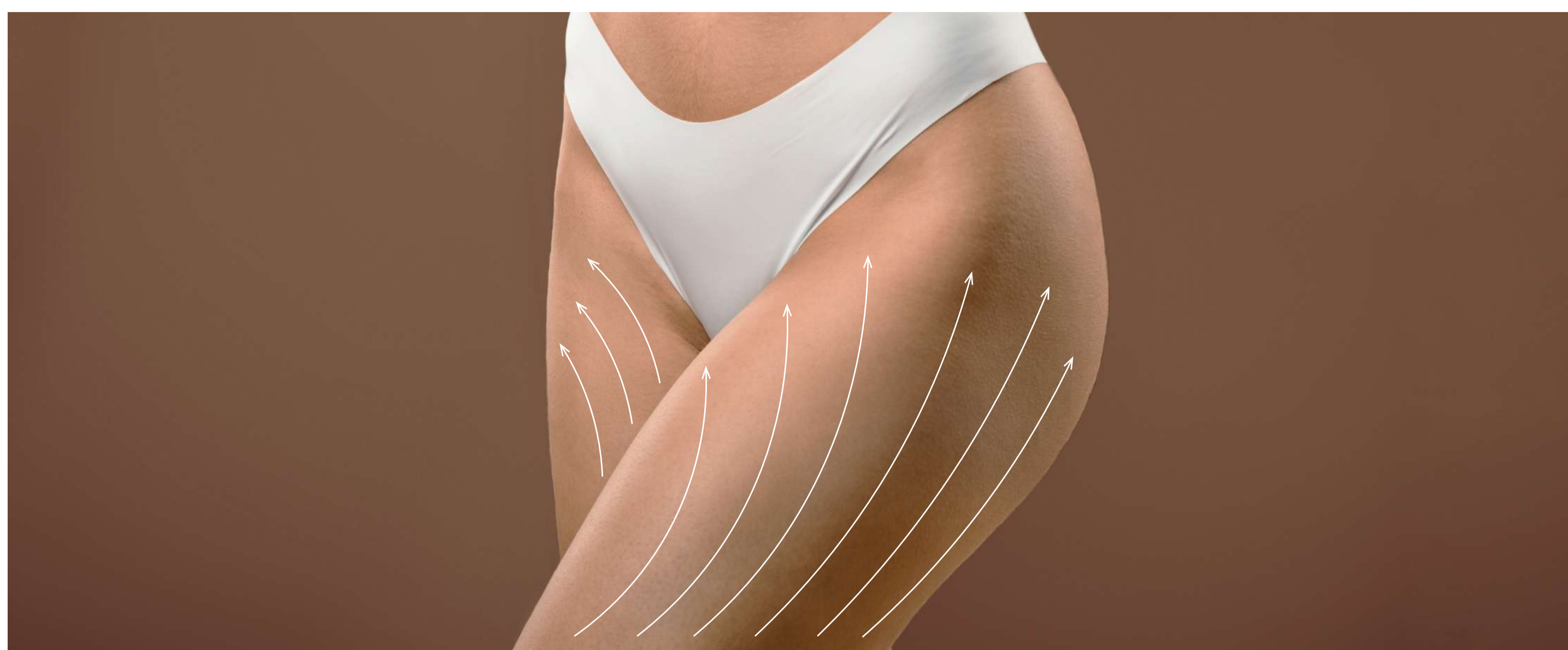

Расположите массажер плотно к коже и медленно перемещайте по каждой ноге согласно массажным линиям снизу вверх.

Рекомендуемое время процедуры на одной ноге: 3-4 минуты.

## Руки и внутренняя поверхность плеч



Плотно прижмите массажер к руке и перемещайте его массажными движениями от периферии к центру в сторону подмышечной впадины.

Рекомендуемое время процедуры на одной руке: 3-4 минуты.

## Ягодицы



Расположите массажер снизу ягодиц и медленно перемещайте его прямыми движениями согласно массажным линиям от центра к периферии.

Для видимого результата необходимо провести курс процедур, продолжительность которого составляет 28-30 дней.

Процедуры можно выполнять 5 дней подряд, затем делая перерыв на 2 дня, либо с интервалом через сутки.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом процедуры внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации.

- 1 Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте.
- 2 Избегайте любых механических воздействий на прибор.
- 3 Если в процессе использования вы заметили некорректную работу прибора, немедленно завершите процедуру и обратитесь в отдел технической поддержки.
- 4 Не разбирайте устройство самостоятельно, обратитесь в отдел технической поддержки.
- 5 Не пользуйтесь прибором в помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна, бассейн), избегайте попадания любых жидкостей на прибор.

# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые инфекционные заболевания
- Беременность
- Онкологические заболевания
- Нарушение целостности кожных покровов, дерматологические заболевания
- Воспалительные процессы, гнойные воспаления
- Подкожные имплантаты или инородные тела
- Повышенное артериальное давление

# С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

При наличии ботокса или филлеров не рекомендуется использовать массажер в течение 2-х недель после введения препарата.

При наличии брекет-систем, металлических коронок и других изделий из металла.

При наличии пирсинга тщательно обходите эти зоны во время процедуры, немедленно завершите процедуру при возникновении болезненных ощущений.

## **Важно!**

При наличии нитей или имплантов в лицевой зоне обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость аккумулятора:	850 мАч
Мощность:	МАХ 10Вт
Среднее время зарядки:	4 часа
Автономная работа:	40 дней
Время одного сеанса:	10 минут



## ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ