

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Прибор для ультразвуковой чистки **Honey Care** отвечает за комплексный базовый уход за кожей в домашних условиях.

Благодаря повышенной частоте ультразвука (24 КГц) происходит глубокое очищение кожи на клеточном уровне.

Ультразвуковая чистка помогает избавиться от комедонов, черных точек, воспалений, загрязнений и ороговевших клеток кожи.

Также она способствует устранению отеков, неглубоких морщин, неровного цвета лица и дряблости кожи.

Волновые колебания улучшают кровообращение, удваивают эффект от косметологических процедур.

Прибор изготовлен из качественных материалов, он компактный и легкий, что позволяет взять его с собой в путешествие.

Для достижения видимого эффекта прибор рекомендуется использовать регулярно.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

Прибор предназначен только для личного использования.

- 1** Не разбирайте прибор и не пытайтесь выполнять какие-либо другие процедуры, не указанные в нашей инструкции.
- 2** Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном детям.
- 3** Не промывайте прибор под струей воды, так как это может вызвать внутренние повреждения.
- 4** Не рекомендуется проводить процедуру в ваннных комнатах и бассейнах.
- 5** Прибор следует хранить вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- 6** Не вскрывайте корпус прибора. В случае неполадок обратитесь в техническую поддержку.
- 7** Используйте прибор только с гелем или сывороткой. Во время процедуры кожа должна быть увлажнена.
- 8** Если при использовании прибора вы почувствовали боль или дискомфорт, немедленно прекратите его использование.
- 9** Не пользуйтесь прибором вблизи легковоспламеняющихся веществ (этиловый спирт, бензин, жидкость для снятия лака, спрей и т.д.)
- 10** Если прибор повредился при падении или ударе, прекратите его использование.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

После процедуры обязательно выключите прибор.

Удалите остатки косметологических средств ватным диском.


Чтобы исключить накопление жира и других загрязнений на лопатке, протрите прибор раствором хлоргексидина.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность и кормление
- Любые виды аритмии
- Заболевания крови
- Онкология
- Наличие электрокардиостимулятора
- Повреждение кожных покровов в области лица и шеи
- Дерматиты и дерматозы, аллергическая реакция
- Воспалительные процессы, обострения акне
- Заболевания лицевого нерва
- Наличие имплантов
- Психические расстройства
- Острые вирусные заболевания, грипп

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- Лопатка должна соприкасаться с кожей под углом 45°.
- Не останавливайтесь на одном и том же участке кожи. Медленно проводите лопаткой по поверхности лица.
- Перед первым использованием прибор необходимо зарядить. Индикатор будет гореть красным цветом в первые пару минут после подключения к зарядному устройству, затем погаснет. Обычно процесс зарядки занимает около 3 часов.
- Перед проведением процедуры необходимо очистить кожу от макияжа и загрязнений.
- Для достижения наилучшего эффекта выполните скрабирование кожи.
- Нанесите на кожу гель/сыворотку на водной основе предназначенную для ультразвуковых процедур. Гель является идеальным проводником ультразвуковых волн. С помощью него лопатка лучше скользит по коже и не травмирует ее.
- Проводите процедуру поступательными движениями по массажным линиям.

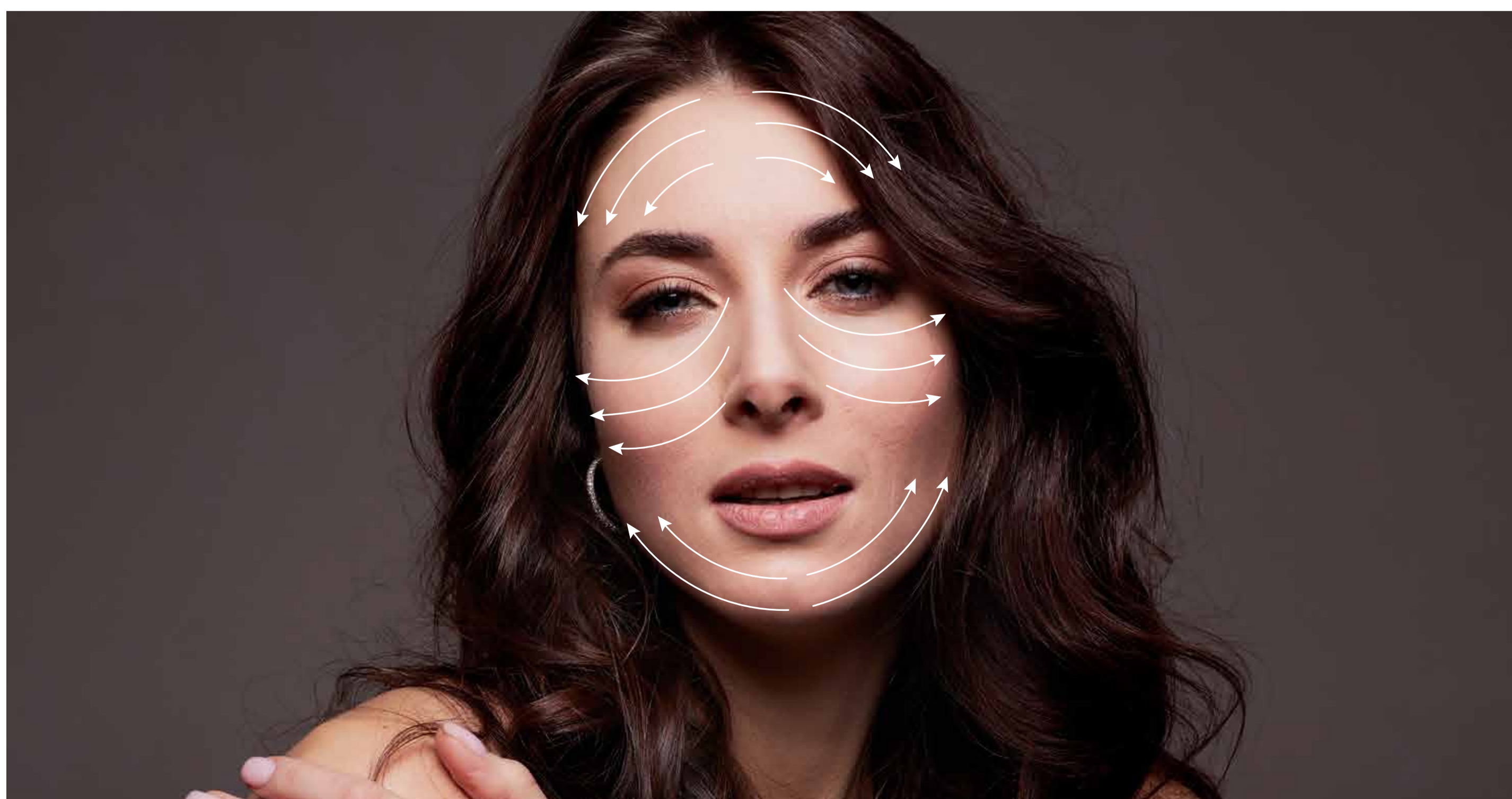

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищающий лифтинг


- 1** Очистите кожу лица и нанесите гель или крем.
- 2** Лопатка прибора расположена наружу и направлена вниз. Слегка надавливайте на лопатку для эффективного очищения пор.
- 3** Удалите остатки средства с кожи ватным диском.

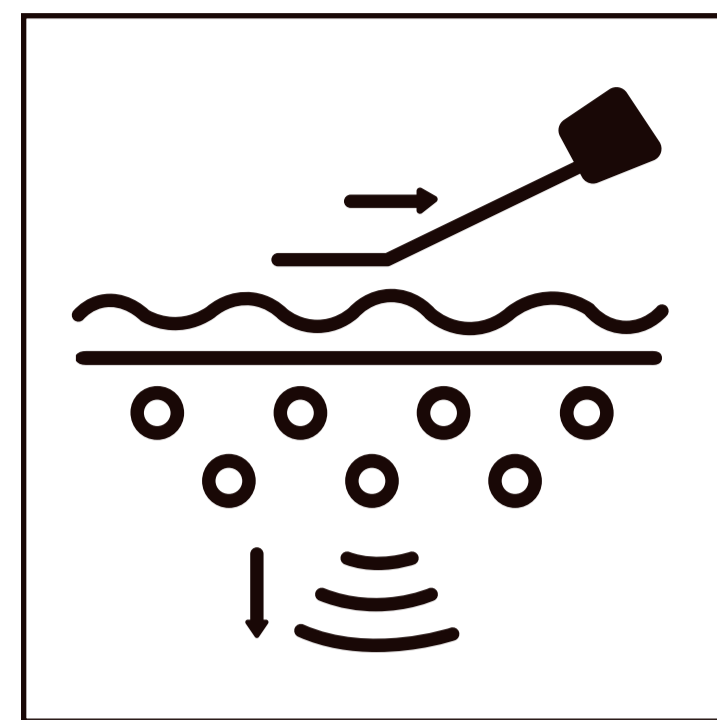

Время сеанса: 5-10 минут (1-3 раза в неделю).

Ультразвуковой пилинг


- 1** Очистите кожу лица и нанесите тонер или лосьон на 10 минут.
- 2** Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вниз. Медленно перемещайте её по поверхности кожи.
- 3** Умойтесь теплой водой после завершения процедуры.

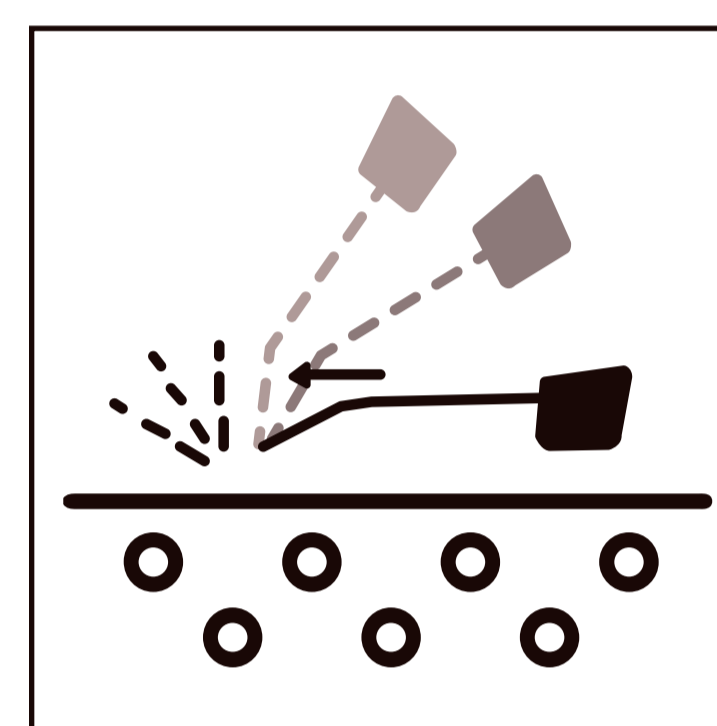

Время сеанса: 5-10 минут.

Холодное гидрирование


- 1** Очистите кожу лица и нанесите гель или маску с экстрактом алоэ для открытия пор.
- 2** Оберните лицо пищевой пленкой на 10-15 минут.
- 3** Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вниз. Медленно перемещайте лопатку по поверхности кожи. Не задерживайтесь длительное время на одном участке кожи.
- 4** После процедуры умойтесь теплой водой.

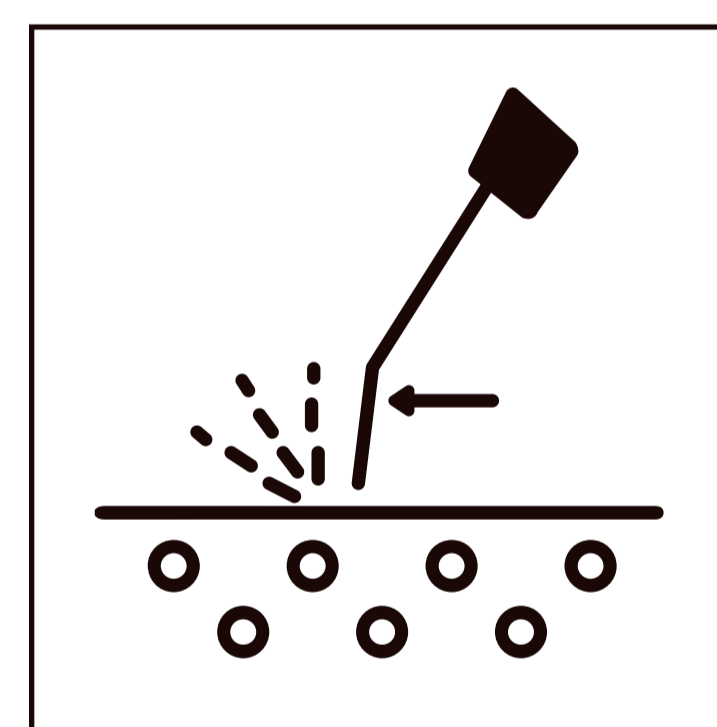

Время сеанса: 5-10 минут.

Питание и массаж кожи

- 1** Очистите кожу лица и нанесите увлажняющий тоник/крем.
- 2** Переверните прибор обратной стороной.
- 3** Обратная сторона лопатки должна соприкоснуться с кожей под углом в 45°. Медленно перемещайте лопатку, для глубокого проникновения уходовых средств.

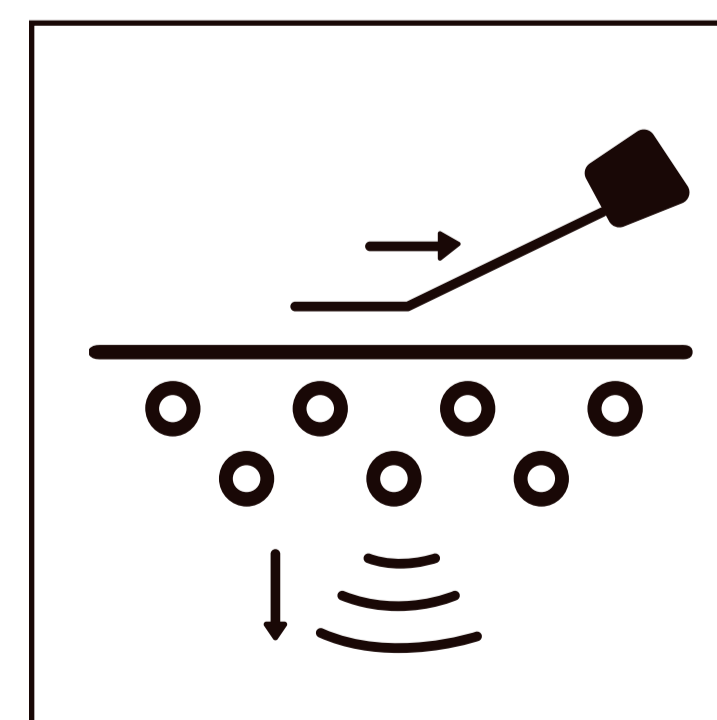

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Микромассаж

С помощью ультразвуковых волн образуются микровибрации, стимулирующие дерму. Это помогает убрать тонус напряженных мышц, расслабляет их.

При регулярном применении выравнивается тон лица.

Фонофорез

Ультразвуковые волны помогают косметологическим средствам проникать глубоко в клетки кожи, тем самым удваивая эффективность процедур.

Дезинкрустация

Под действием отрицательно заряженного электрода происходит размягчение жировых пробок, раскрываются поры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: 3.7В

Емкость батареи: 350 мА·ч

Входное напряжение: 5В/1А

Мощность: 3 Вт

Вес: 80 грамм

Размер прибора: 70 x 45 x 135 мм

Размер упаковки: 76 x 35,5 x 190,5 мм

Частота: 24 КГц

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ