

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

для очищения кожи

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковая чистка — очень важная процедура для поддержания здоровья и красоты вашей кожи.

Мы рекомендуем соблюдать регулярность процедуры для достижения максимальной эффективности.

С помощью ультразвуковых волн и особых заряженных ионов, данный аппарат позволяет осуществлять комплексный уход за кожей в домашних условиях. Ультразвуковые волны способствуют глубокому проникновению косметологических и косметических средств в клетки кожи (фонофорез).

Прибор оказывает лифтинг-эффект, очищает и увлажняет кожу. ЖК-экран отображает режим работы, уровень заряда и время процедуры. Всего одна кнопка управляет программами по уходу, что делает процесс максимально простым.

Аппарат изготовлен из качественных материалов, он компактный и легкий, что позволяет взять его с собой в путешествие.

Покупатели влюбляются в него с первого взгляда!

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данную инструкцию и храните прибор должным образом, чтобы избежать повреждений и рисков, вызванных неправильной эксплуатацией.

Прибор предназначен только для личного использования.


- 1 Не разбирайте прибор и не пытайтесь выполнять какие-либо другие процедуры, не указанные в нашей инструкции.
- 2 Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном детям.
- 3 Не промывайте прибор под струей воды.
- 4 Не рекомендуется проводить процедуру в ваннах, комнатах и бассейнах.
- 5 Прибор следует хранить вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- 6 Не вскрывайте корпус прибора. В случае неполадок обратитесь в техническую поддержку.
- 7 Используйте прибор только с гелем или сывороткой. Во время процедуры кожа должна быть увлажнена.
- 8 Если при использовании прибора вы почувствовали боль или дискомфорт, немедленно прекратите его использование.
- 9 Не пользуйтесь прибором вблизи легковоспламеняющихся веществ (этиловый спирт, бензин, жидкость для снятия лака, спрей и т.д.).
- 10 Если прибор повредился при падении или ударе, прекратите его использование.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ


- После процедуры обязательно выключите прибор.
- Удалите остатки косметологических средств ватным диском.
- Чтобы исключить накопление жира и других загрязнений на лопатке, протрите прибор раствором хлоргексидина.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 Перед проведением процедуры необходимо очистить кожу от макияжа и загрязнений.
- 2 Для достижения наилучшего эффекта выполните скрабирование кожи.
- 3 Нанесите на кожу гель/сыворотку на водной основе, предназначенную для ультразвуковых процедур. Гель является идеальным проводником ультразвуковых волн. С помощью него лопатка лучше скользит по коже и не травмирует ее.
- 4 Проводите процедуру поступательными движениями по массажным линиям.

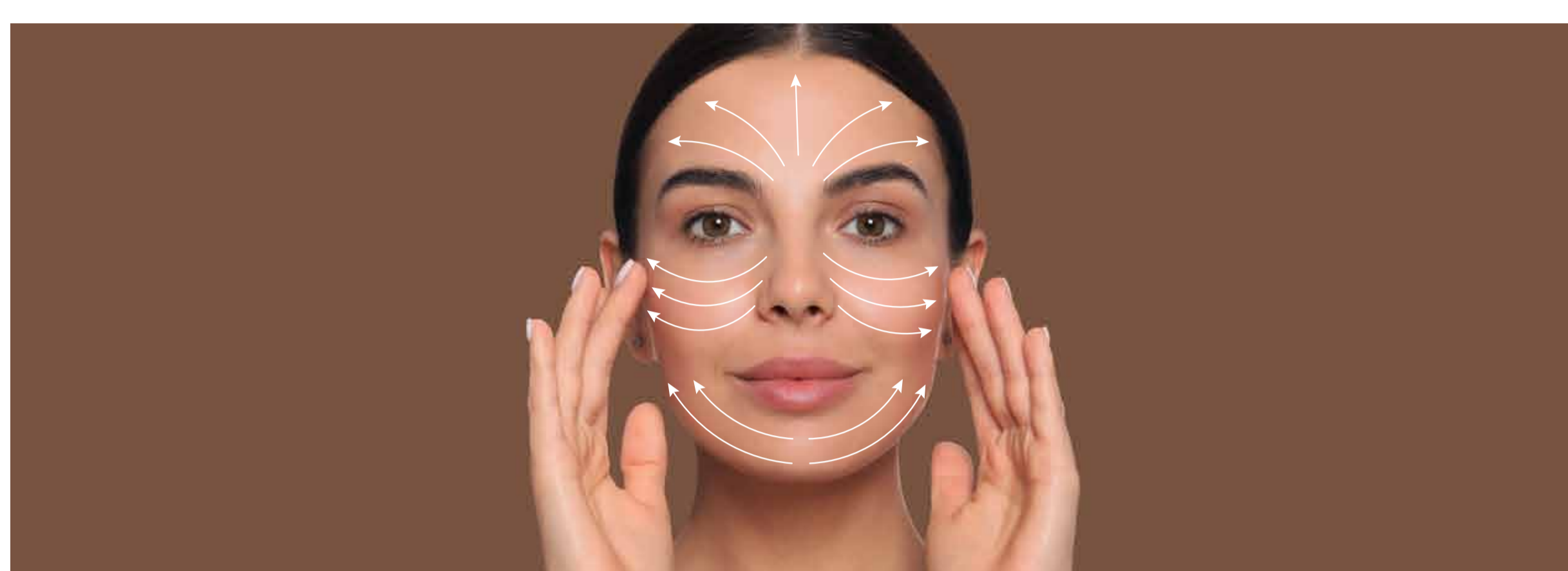

- 5 После процедуры рекомендуется нанести маску/крем для лица, подходящую для вашего типа кожи.
- 6 Во время процедуры не рекомендуется многократная (от 8 раз за один сеанс) обработка лопаткой одного и того же участка кожи.
- 7 Для проникновения ионов в глубокие слои кожи необходимо непрерывное касание лопаткой.
- 8 Сохраняйте угол наклона лопатки около 45°, как показано на рисунке.

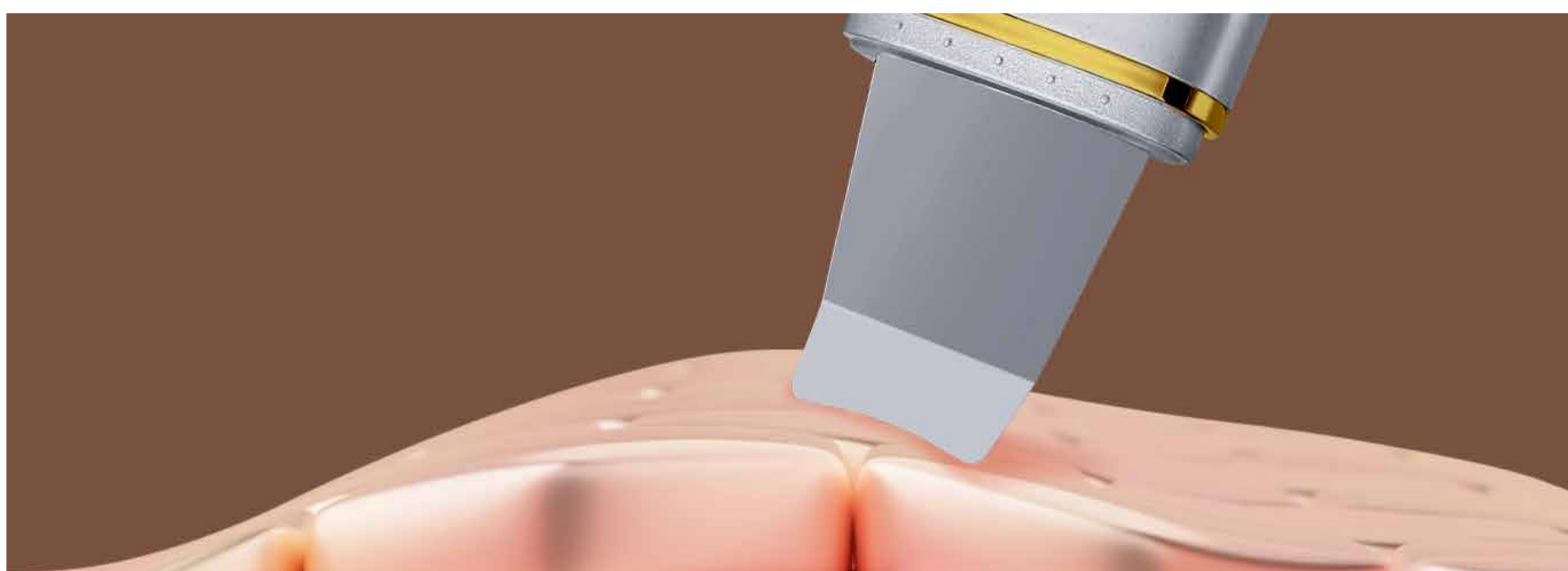

- 9 Если на лице есть участки с воспалением, воздержитесь от обработки, дождитесь восстановления кожи.
- 10 Используйте прибор 1-3 раза в неделю. Не следует пользоваться им несколько раз в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- инфекционные и кожные заболевания
- аллергические реакции кожи
- нарушение целостности кожных покровов
- обострение акне
- небольшой временной промежуток после выполнения химического пилинга
- прием медицинских препаратов, повышающих чувствительность кожи
- недавно перенесенная пластическая операция
- онкологические заболевания
- гипертония
- нарушения сердечного ритма
- невралгия
- наличие психических расстройств
- ранний реабилитационный период после хирургии
- хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения
- лихорадочное состояние (при гриппе, ОРЗ, ОРВИ и т.д.)
- наличие злокачественных новообразований

РЕЖИМЫ

Ультразвуковой пилинг

Глубокое очищение, устранение черных точек и комедонов.

- Очистите и увлажните кожу лица.
- Включите прибор. Будет активирована программа по умолчанию — ультразвуковая очистка.
- Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вниз.
- Медленно перемещайте её по коже.

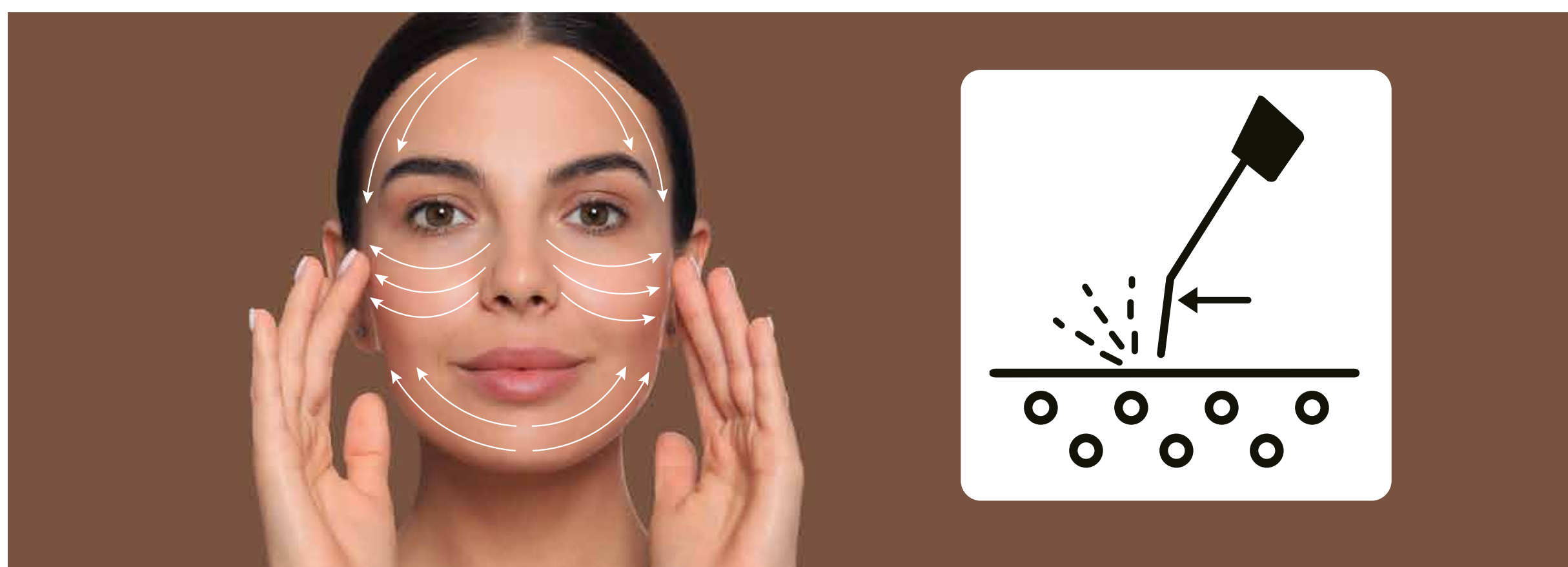

Время сеанса: 5-10 минут (1 раз в неделю).

Режим микромассажа и лифтинга

Повышение упругости кожи, улучшение кровообращения, лифтинг кожи лица, разглаживание мимических морщин, устранение следов постакне.

- Очистите кожу лица.
- Нанесите увлажняющий крем или сыворотку.
- Включите прибор. Для активации режима массажа, нажмите кнопку еще раз. Прибор начнет работать прерывисто.
- Лопатка прибора расположена наружу и направлена вверх. Установите её на коже плоской стороной, как показано на рисунке.
- Проводите лопаткой от центра лица к периферии по массажным линиям.





Время сеанса: 5-10 минут (2-3 раза в неделю).

Благодаря этой процедуре эффект от косметических средств для ухода удваивается, обеспечивая стойкое антивозрастное, увлажняющее и питательное действие.

Режим глубокого очищения с положительными ионами

Борьба с несовершенствами кожи (комедоны, угревая сыпь, закупоренные поры). Прибор способствует глубокому проникновению косметологических средств в глубокие слои кожи.

- Очистите кожу лица и нанесите на нее тоник\лосьон.
- Включите прибор. Для активации режима, нажмите кнопку три раза. Прибор начнет работать в режиме положительных ионов. На дисплее появится надпись ION+.
- Лопатка прибора расположена внутрь и направлена вверх. Слегка надавливайте на прибор для эффективного очищения.

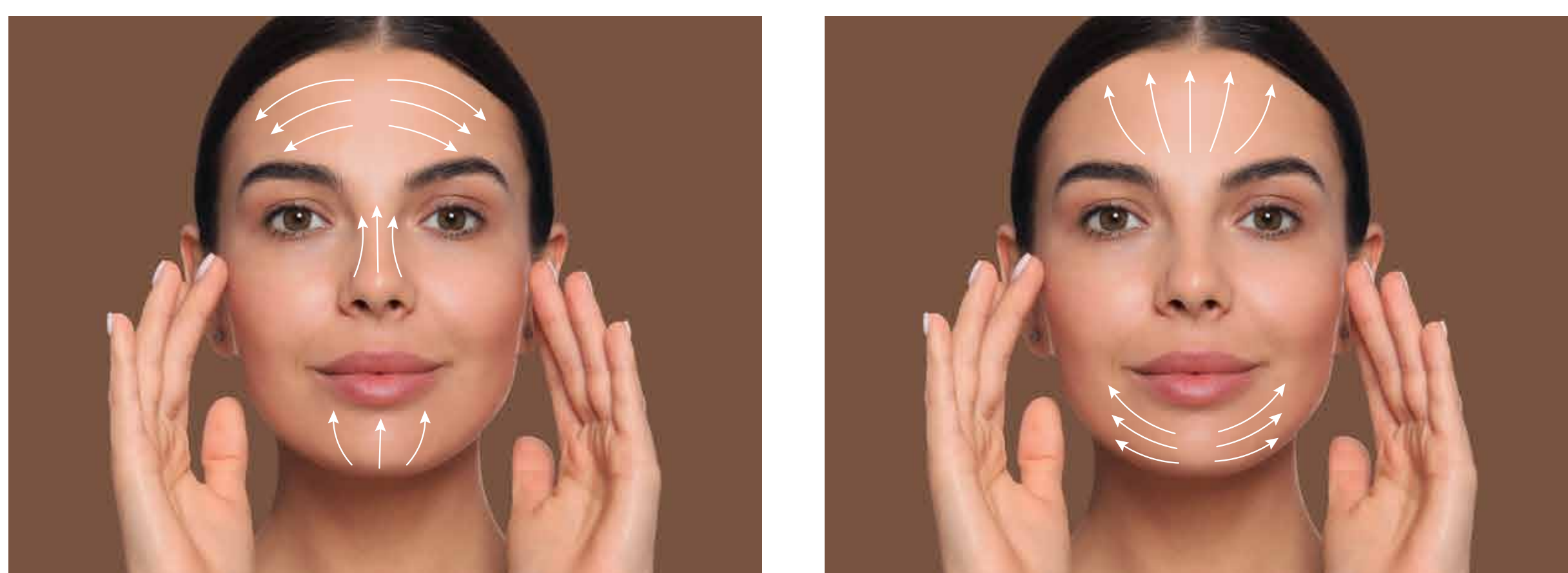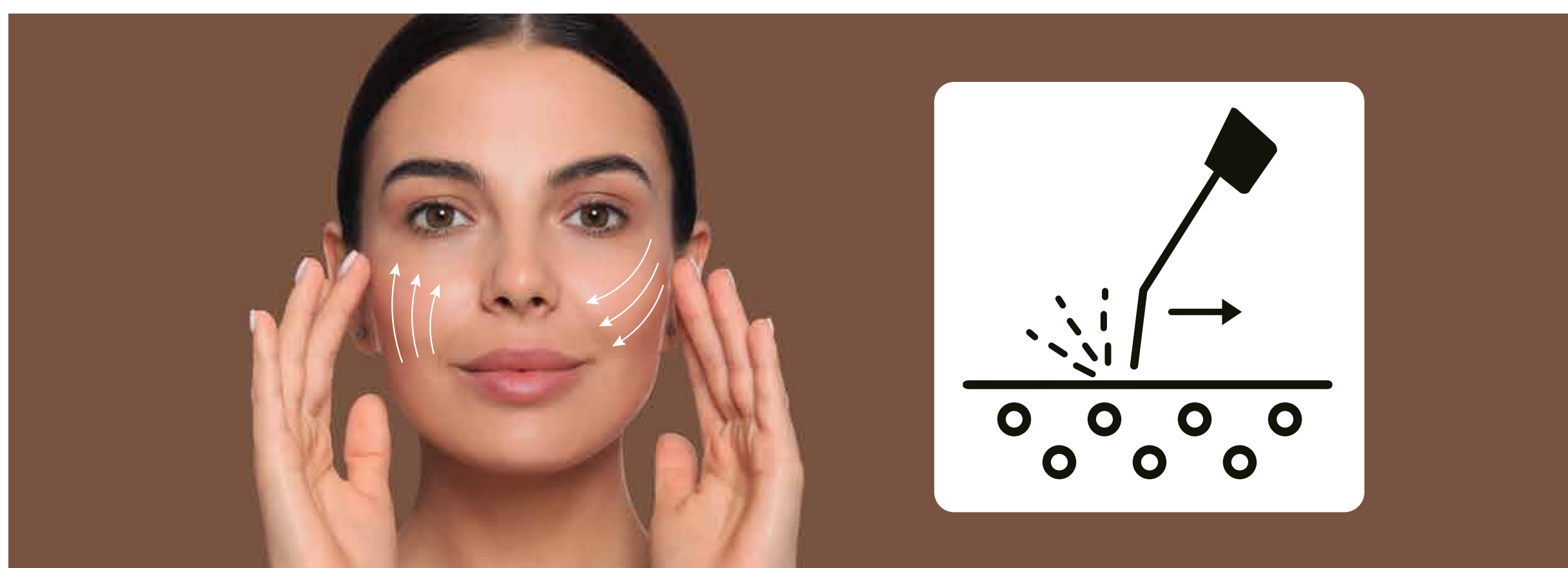


Время сеанса: 5-10 минут (2-3 раза в неделю).

Режим питания с отрицательными ионами

Уменьшение отеков и синяков под глазами, увлажнение и снятие раздражений.

- Очистите кожу и нанесите на нее тоник или лосьон.
- Включите прибор. Для активации режима, нажмите кнопку четыре раза. Прибор начнет работать в режиме отрицательных ионов. На дисплее появится надпись ION-.
- Лопатка прибора расположена наружу и направлена вверх.

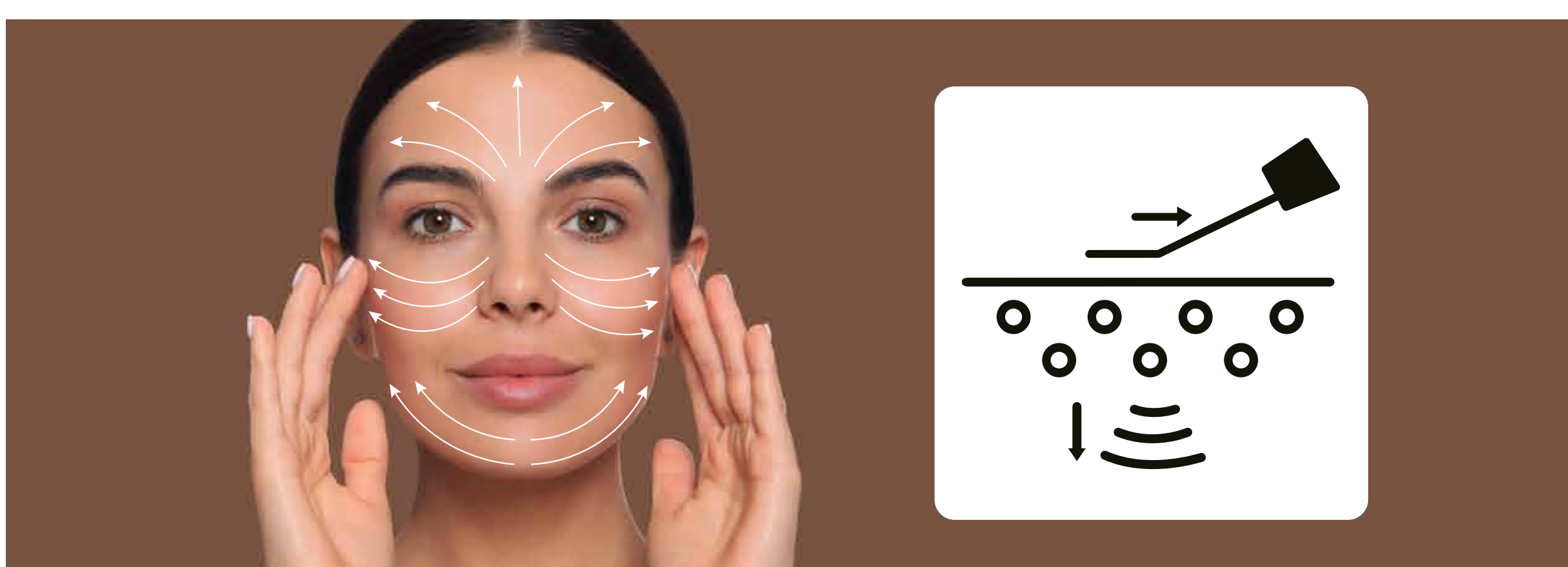

Время сеанса: 5-10 минут (2-3 раза в неделю).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Фонофорез

Ультразвуковые волны помогают косметологическим средствам проникать глубоко в клетки кожи, тем самым удваивая эффективность процедур.

Ионофорез

С помощью слабого электрического тока ионы питают и увлажняют кожу на клеточном уровне, а также повышают эффективность косметических средств.

Используйте режимы ИОН+ и ИОН-.

Дезинкрустация

Под действием отрицательно заряженного электрода происходит размягчение жировых пробок, раскрываются поры.

Используйте специальный токопроводящий гель для дезинкрустации и режим ИОН-.

Микромассаж

С помощью ультразвуковых волн образуются микровибрации, стимулирующие дерму. Это помогает убрать тонус напряженных мышц, расслабляет их.

При регулярном применении выравнивается тон лица.

Лифтинг

Ультразвуковые волны способствуют процессу регенерации клеток и образованию коллагена. Разглаживаются мимические морщины, повышается тонус кожи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАТАРЕЯ

3,7 В, DC

ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ

500 мА-ч

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

5 В, DC

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

1,5 Вт

ВЕС НЕТТО

около 80 г

РАЗМЕР ПРИБОРА

70 x 45 x 135 мм


РАЗМЕР УПАКОВКИ

76 x 35,5 x 190,5 мм

Изделие, упаковочный материал и аксессуары изготовлены из перерабатываемых материалов.

Устранение неисправностей

Если прибор не работает, прекратите пользоваться им и обратитесь в техническую поддержку.

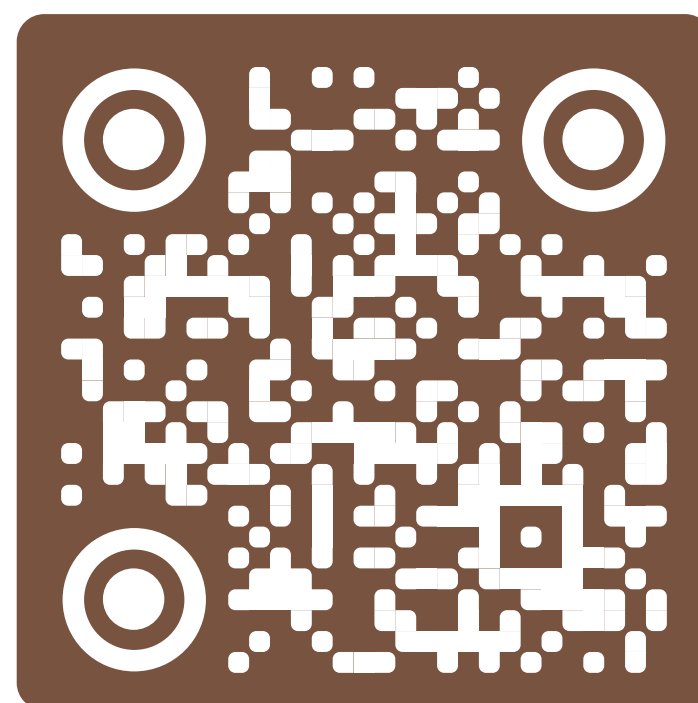

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ